

1 NX Office Viewer starten

- Dubbelklik op het NX Office Viewer-pictogram op uw bureaublad of klik op **Start > (Alle) Programma's > Office Viewer** starten.




Het aanmeldingsscherm wordt weergegeven.

- Voer uw wachtwoord in en klik op **OK**.

Het standaardwachtwoord is blanco.

Het informatiescherm van NX Office Viewer verschijnt en de toepassing wordt geopend in Normale modus.

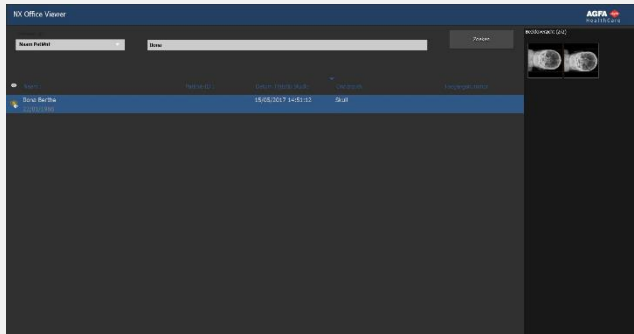

Het verdient aanbeveling het standaardwachtwoord te vervangen door een eigen wachtwoord, wanneer u voor het eerst inlogt.

2 Zoeken naar onderzoeken


- Voer in het paneel Zoeken specifieke criteria in om onderzoeken van een In-Room MUSICA Acquisition Workstation op te halen.



U kunt zoeken op patiëntnaam, patiënt-ID, toegangsnummer of onderzoeksdatum.

De standaardselectie is Datum Onderzoek met de actuele datum in het tekstveld.

- Klik op Zoeken om een lijst van onderzoeken te zien die aan uw criteria voldoen.

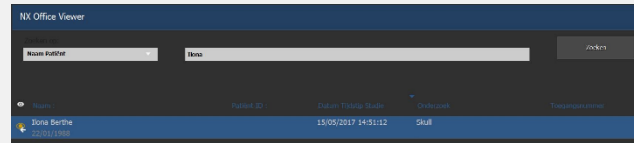

Het oogpictogram verschijnt naast het onderzoek in de werklIJst wanneer hetzelfde onderzoek wordt bekeken op een In-Room MUSICA Acquisition Workstation. Het wordt dan mogelijk gewijzigd door een andere gebruiker.




- Klik op een kolomkop om de lijst te sorteren op basis van de geselecteerde kolom.

U kunt de mogelijke sorteervolgorde doorlopen (oplopend of aflopend) door nogmaals op de kolomkop te klikken.

3 Een beeld selecteren

- Selecteer een onderzoek in de lijst.

Alle beelden van dit onderzoek verschijnen als miniaturen in het overzichtsvenster.

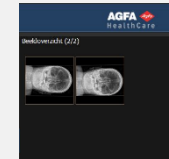

- Klik op het beeld dat u wilt weergeven.

Het geselecteerde beeld verschijnt op volledige schermgrootte met de patiëntgegevens in de linkeronderhoek en de belichtingsgegevens in de rechteronderhoek.



4 Beelden bekijken

Opmerking: Beeldwijzigingen die in Office Viewer worden aangebracht, hebben geen invloed op het beeld dat is opgeslagen op het MUSICA Acquisition Workstation.

- in- en uitzoemen** Draai aan het muiswiel
- beeldweergave verplaatsen** Verplaats de muis met ingedrukte muisknop
- Window/Level aanpassen** Dubbelklik en verplaats de muis



Klik op de secundaire muisknop en maak een keuze in het contextmenu.

Opmerking: wanneer u een screenshot wilt afdrukken moet er een Windows-printer op de pc zijn aangesloten. U kunt dit beeld niet afdrukken op een medische printer.


Let op: Wanneer u een screenshot afdrukt of opslaat, is dit altijd in niet-diagnostische kwaliteit.

- Druk op een willekeurige toets of klik op het rode kruis in de rechterbovenhoek van het toepassingsvenster om de volledig-schermweergave te sluiten.



5 Beelden vergelijken

- Klik op de knop **Modus Vergelijken** om over te schakelen van de Normale modus naar de Vergelijksmodus.
- Selecteer in de Vergelijksmodus twee beelden die u naast elkaar wilt weergeven op volledig scherm en klik op de knop **Beelden vergelijken**.

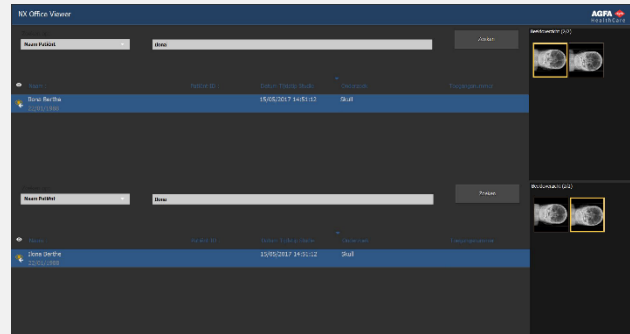

Het beeld van het onderzoek uit de bovenste onderzoekslijst verschijnt links op het scherm. Het beeld van het onderzoek uit de onderste onderzoekslijst verschijnt rechts op het scherm.



U kunt dezelfde weergavebewerkingen als in de Normale modus uitvoeren op beide beelden afzonderlijk. Alleen **Schermbild afdrukken** en **Schermbild opslaan als JPEG** hebben altijd betrekking op de beide beelden samen.