

Kaip valyti CR MD4.0T ir CR MM3.0T vaizdo plokštę bei dėklą

Turinys

Kaip valyti dėklą ir vaizdo plokštę	3
Kada reikia valyti dėklą ir vaizdo plokštę?	4
Kokias valymo priemones leidžiama naudoti?	5
Kaip valyti dėklą ir vaizdo plokštę?	6

Kaip valyti dėklą ir vaizdo plokštę



Pastaba: Užtikrinkite, kad dėklo ir vaizdo plokštės komplektas po valymo visuomet būtų įdedamas į vieną kasetę. Svarbu, kad vaizdo plokštė nebūtų įdėta į dėklą, kuris buvo parengtas darbui su kita vaizdo plokšte.

Temos:

- *Kada reikia valyti dėklą ir vaizdo plokštę?*
- *Kokias valymo priemones leidžiama naudoti?*
- *Kaip valyti dėklą ir vaizdo plokštę?*

Kada reikia valyti dėklą ir vaizdo plokštę?

Vidinė kasetės pusė išklota veltiniu. Tai užtikrina gerą apsaugą nuo statinių elektros krūvių bei dulkių susikaupimo ant vaizdo plokštės. Nepaisant to, rekomenduojama CR MD4.xT vaizdo plokštės valyti bent kartą per mėnesį, ar vos tik kyla abejonų apie rentgeno nuotraukose matomas daleles. Jei aplinka dulkėta arba labai sausa, gali reikėti valyti dažniau.

CR MM3.xT plokštės reikia dažniau valyti: ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę arba kas 200 ciklų (kuri iš šių sąlygų įvyks anksčiau).


Kokias valymo priemonės leidžiama naudoti?

- CR MD4.xT General vaizdo plokštėms valyti naudokite tik „AGFA CR Phosphor Plate Cleaner“ ir minkštą, pūkelių nepaliekančią celiuliozinę šluostę arba „Polynit“ servetėles.
- CR MM3.0T Mammo vaizdo plokštėms valyti naudokite tik „AGFA CR Phosphor Plate Cleaner“ ir „Polynit“ šluostes.
- Dėklo valymui naudokite tik sausą šluostę arba nupūskite dulkes suspaustu oru.


Kaip valyti dėklą ir vaizdo plokštę?

Dėklui ir vaizdo plokštei valyti?

1. Į kasetės užraktą įkiškite raktą arba rašiklį, kad atidarytumėte eksponavimo užraktą.

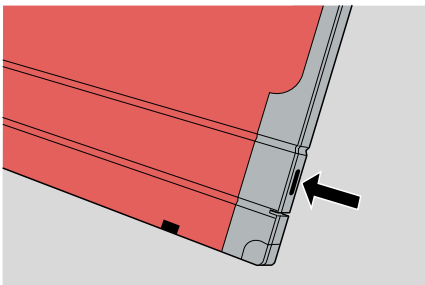


2. Ištraukite raktą arba rašiklį.
3. Apverskite kasetę, kad juodoji (į lempą nukreipiama) pusė būtų nukreipta į viršų.
4. Laikykite eksponavimo užraktą abiem nykščiais ir atsargiai leiskite juodam dėklui ir vaizdo plokštei išslysti ant stalo.

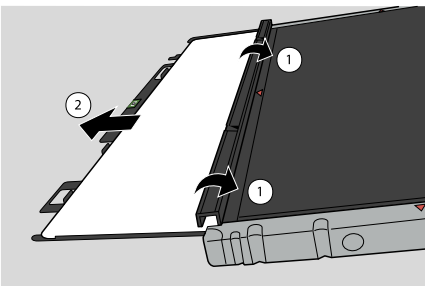

5. Padėkite juodą dėklą su vaizdo plokšte ant kasetės kaip parodyta žemiau pateiktame paveikslėlyje.

Dėklas turi 2 mažus kabliukus. Padėkite dėklą ant kasetės taip, kad kabliukai būtų užkabinti už kasetės krašto. Taip apsaugosite dėklą ir vaizdo plokštę nuo sulenkimo.

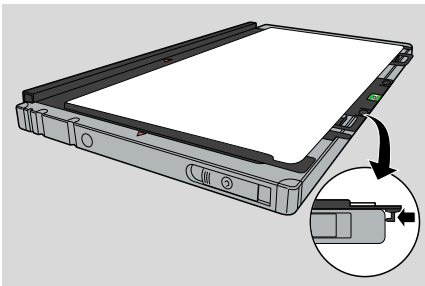


6. Vaizdo plokštę ir dėklą nuvalykite taip:

- Paimkite atitinkamą servetėlę arba valikliu sudrėkinkite šluostę ir švelniai bei tolygiai nuvalykite **vaizdo plokštės paviršių**.
- Leiskite **vaizdo plokštės paviršiui** išdžiūti apytiksliai 10 minučių, kad išgaruotų tirpiklis.
- Kruopščiai nuvalykite **dėklą** sausa šluoste arba nupūskite dulkes suspaustu oru (iš skardinės). (NENAUDOKITE EKRANO VALIKLIO DĖKLUI VALYTI.)
- Kai vaizdo plokštės paviršius išdžius (apytiksliai po 10 minučių), vėl patikrinkite, ar nėra pašalinių dalelių ar kitų teršalų, prieš įdėdami dėklą ir vaizdo plokštę į kasetę.

7. Įdėkite dėklą su vaizdo plokšte į kasetę.

Užtikrinkite, kad balta fosforuota pusė būtų nukreipta į juodąją kasetės pusę ir užraktas nebraižytų vaizdo plokštės paviršiaus.

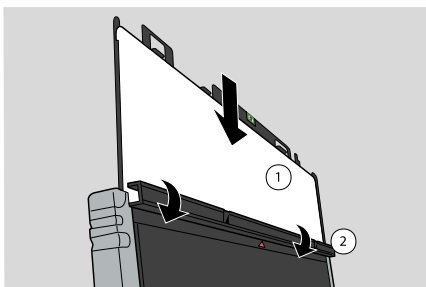


1. Balta fosforuota pusė
2. Juoda, į lempą nukreipiama kasetės pusė



Perspėjimas: Pasistenkite atsargiai įstatyti vaizdo plokštę. Saugokite, kad į kasetę plokštė neįkristų vertikaliai! Tai gali pakenkti fosforui.

8. Kai juodas dėklas su vaizdo plokšte bus visiškai kasetės viduje, uždarykite užraktą.

Kad užraktas lengvai užsidarytų, jį uždarydami, į kasetės užrakto lizdą įkiškite raktą arba rašiklį. Uždarę užraktą, raktą arba rašiklį ištraukite.

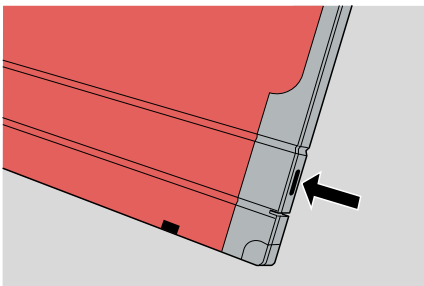

8 | Kaip valyti CR MD4.0T ir CR MM3.0T vaizdo plokštę bei dėklą | Kaip valyti dėklą ir vaizdo plokštę



Pastaba: Išvalius, prieš naudojimą būtina ištrinti detektorius.