



1 Wykonanie ekspozycji w trybie cała noga/cały kręgosłup

- 1 Dodaj zestaw ekspozycji całej nogi/całego kręgosłupa (CNCK) do badania.
- 2 Włóż kasety radiograficzne (CNCK) do pojemnika, tak jak pokazano to na poniższej ilustracji.
Zwróć szczególną uwagę na orientację kaset:
 - Patrząc od strony uchwytu kasety wkładaj kasety czarną stroną skierowaną do siebie.
 - Trzymaj kasety tak, aby etykieta była na górze.

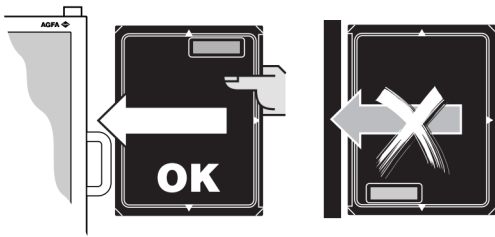

 *Uwaga: Nieprawidłowe położenie kaset w pojemniku na kasety spowoduje powstanie artefaktów na obrazach.*

- 3 Przeprowadź badanie całej nogi/całego kręgosłupa.
- 4 Włóż kasety do skanera. Koniecznie zidentyfikuj obrazy częściowe odpowiednio do ekspozycji.

Gdy ostatni obraz zostanie odebrany w stacji roboczej, nastąpi utworzenie dodatkowego obrazu w badaniu, który będzie zawierał sklejony obraz FLFS.



Uwaga: Jeśli sklejony obraz FLFS nie jest tworzony automatycznie, należy sprawdzać prawidłowość anatomicznego uporządkowania obrazów częściowych.

Szczegółowe informacje można znaleźć w publikacjach:

- Podręcznik użytkownika stacji NX, sekcja „Sklejanie obrazów typu cała noga/cały kręgosłup”
- Podręcznik użytkownika aplikacji CR Full Leg Full Spine, sekcja „Podstawowe procedury”