

**Ordinateur portable comme point
d'accès mobile avec réseau
hospitalier filaire (DR 10s, DR
14s)**

Manuel de l'utilisateur

Configuration

Les applications Mobile DR et Ultra Mobile DR contiennent un détecteur DR sans fil et un poste de travail MUSICA Acquisition portable et assurent une communication sans fil entre le détecteur et le poste de travail et entre le poste de travail et le réseau de l'hôpital.

Selon la configuration, l'interaction de l'utilisateur est nécessaire pour gérer les connexions réseau.

Dans une configuration Mobile DR, le poste de travail MUSICA Acquisition est déployé sur un PC portable.

Dans une configuration Ultra Mobile DR, le poste de travail MUSICA Acquisition est déployé sur une tablette PC.

Reportez-vous à la documentation utilisateur du détecteur DR pour connaître les consignes de sécurité, l'utilisation prévue et les instructions générales d'utilisation.

Réseau hospitalier câblé - poste de travail en tant que point d'accès (pour PC portable)

Détecteurs DR :


- DR 10s, DR 14s

Uniquement pour Windows 10 sur PC portable.

Le poste de travail communique avec le réseau de l'hôpital uniquement via une connexion réseau câblée. La connexion sans fil au réseau de l'hôpital n'est pas prise en charge.

Le poste de travail communique avec le détecteur via l'adaptateur Wi-Fi interne, agissant comme un point d'accès.

Le point d'accès du poste de travail doit être réactivé après chaque redémarrage ou lorsque le détecteur n'a pas été utilisé pendant plus d'une journée. Pendant le processus d'activation du point d'accès, le poste de travail doit être connecté au réseau câblé de l'hôpital.

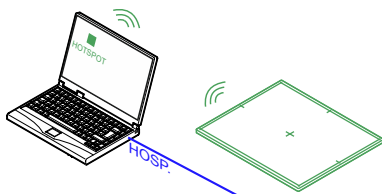

- Le poste de travail MUSICA Acquisition est connecté au réseau de l'hôpital pour récupérer les données du SIR ou pour imprimer ou archiver des images.
- Le point d'accès mobile peut être activé.

Figure 1 : Le poste de travail est en veille



- Le poste de travail MUSICA Acquisition est déconnecté du réseau de l'hôpital.

Figure 2 : Le poste de travail est utilisé pour un examen

Rubriques :

- *Préparation du système pour la réalisation d'un examen*
- *Le détecteur DR est déplacé hors de portée du point d'accès mobile*
- *Le commutateur du point d'accès mobile est grisé*

Préparation du système pour la réalisation d'un examen

Le point d'accès du poste de travail doit être réactivé après chaque redémarrage ou lorsque le détecteur n'a pas été utilisé pendant plus d'une journée. Pendant le processus d'activation du point d'accès, le poste de travail doit être connecté au réseau câblé de l'hôpital.

Ne permettez pas au poste de travail d'établir une connexion au réseau sans fil !


1. Démarrez le détecteur DR.
2. Sur le poste de travail MUSICA Acquisition, allez dans le **Menu principal** et cliquez sur le bouton d'action **Afficher Bureau**.

Le bureau Windows s'affiche.

3. Cliquer sur l'icône **Mobile Hotspot** sur le bureau.

Une boîte de dialogue s'affiche.

4. Allumez le point d'accès mobile à l'aide du contrôle du commutateur.

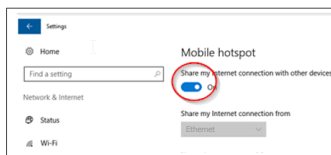

5. Récupérez les informations sur le patient.
6. Sélectionnez la vignette pour la première exposition.

Le détecteur DR se connecte au poste de travail MUSICA Acquisition. Il peut s'écouler jusqu'à 1 minute avant que l'icône de statut du détecteur DR sur l'**Encadré Détecteur DR** indique que le détecteur DR est prêt.

7. Déconnectez la connexion réseau câblée au réseau de l'hôpital.

Le poste de travail et le détecteur peuvent être déplacés et utilisés pour effectuer un examen.

Le PC portable reste allumé lorsque le couvercle est fermé, de sorte que la connexion au détecteur DR reste active.

Une fois l'examen terminé, restaurez la connexion réseau câblée au réseau de l'hôpital pour imprimer ou archiver les images.

Le détecteur DR est déplacé hors de portée du point d'accès mobile

Si le détecteur DR est déplacé hors de portée du point d'accès mobile, la connexion est perdue. Le détecteur DR se reconnectera automatiquement lorsqu'il reviendra dans la portée du point d'accès mobile. La reconnexion peut prendre jusqu'à 85 secondes.

Si la connexion n'est pas rétablie automatiquement, vérifiez si le point d'accès mobile est toujours actif.

La portée normale du point d'accès mobile est de 6 m. Les murs et les portes avec ou sans protection de plomb réduisent la portée du point d'accès mobile.

Le commutateur du point d'accès mobile est grisé

Si le poste de travail n'est pas connecté au réseau câblé de l'hôpital, le point d'accès mobile ne peut pas être activé. Le contrôle du commutateur du point d'accès mobile est grisé.

1. Connectez-vous au réseau câblé de l'hôpital.
Une fois la connexion réseau établie, le commutateur du point d'accès mobile devient disponible.
2. Allumez le point d'accès mobile à l'aide du contrôle du commutateur.



Remarque: Après avoir allumé le point d'accès mobile, la connexion au réseau câblé de l'hôpital n'est plus nécessaire pour maintenir la connexion au détecteur DR.