


Ordinateur portable/tablette avec détecteur comme point d'accès

Manuel de l'utilisateur


Contenu

Mention légale.....	3
Configuration.....	3
Pas de matériel Wi-Fi supplémentaire - détecteur comme point d'accès.....	4
Bascule entre le détecteur DR sans fil et le réseau sans fil de l'hôpital.....	4

Mention légale

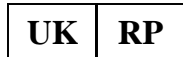

Agfa HealthCare UK Limited, 515 Coldhams Lane, CB1 3JS Cambridge, Cambridgeshire, UK

 Agfa NV, Septestraat 27, 2640 Mortsel - Belgique

Pour de plus amples informations sur les produits Agfa, rendez-vous sur [agfaradiologysolutions.com](https://www.agfaradiologysolutions.com).

Agfa et le losange Agfa sont des marques commerciales d'Agfa-Gevaert N.V., Belgique ou de ses filiales. NX et MUSICA sont des marques commerciales d'Agfa NV, Belgique ou de l'une de ses filiales. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et sont citées à des fins rédactionnelles uniquement, sans intention frauduleuse.

Agfa NV n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, quant à la précision, l'exhaustivité ou l'utilité des informations contenues dans le présent manuel et dénonce particulièrement toute garantie d'adéquation à un usage particulier. Il se peut que les produits et services ne soient pas disponibles dans votre région. Veuillez contacter votre représentant commercial local pour de plus amples informations sur la disponibilité des produits. Agfa NV s'efforce de fournir des informations aussi exactes que possible. Cependant, la société ne pourrait être tenue responsable d'éventuelles erreurs typographiques. En aucun cas, Agfa NV ne pourra être tenue responsable de dommages dus à l'utilisation ou à l'impossibilité d'utiliser des informations, appareils, méthodes ou procédés décrits dans le présent manuel. Agfa NV se réserve le droit d'apporter des modifications à ce document sans préavis. La version originale de ce document est en anglais.

Copyright 2024 Agfa NV

Tous droits réservés.

Publié par Agfa NV

2640 Mortsel - Belgique.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, copiée, adaptée ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans le consentement écrit d'Agfa NV

Configuration

Les applications Mobile DR et Ultra Mobile DR contiennent un détecteur DR sans fil et un poste de travail MUSICA Acquisition portable et assurent une communication sans fil entre le détecteur et le poste de travail et entre le poste de travail et le réseau de l'hôpital.

Selon la configuration, l'interaction de l'utilisateur est nécessaire pour gérer les connexions réseau.

Dans une configuration Mobile DR, le poste de travail MUSICA Acquisition est déployé sur un PC portable.

Dans une configuration Ultra Mobile DR, le poste de travail MUSICA Acquisition est déployé sur une tablette PC.

Reportez-vous à la documentation utilisateur du détecteur DR pour connaître les consignes de sécurité, l'utilisation prévue et les instructions générales d'utilisation.

Pas de matériel Wi-Fi supplémentaire - détecteur comme point d'accès

Détecteurs DR :

- DX-D 40C, DX-D 40G, DX-D 45C, DX-D 45G
- XD 10, XD*10, XD 14, XD*14, XD 17, XD*17
- XF*10, XF*14, XF*17

Uniquement pour Windows 10.

Le poste de travail communique avec le détecteur et le réseau sans fil de l'hôpital via l'adaptateur Wi-Fi interne. Le détecteur est configuré pour servir de point d'accès. Une seule connexion peut être active à la fois.

L'utilisateur doit utiliser les paramètres Wi-Fi de Windows pour basculer entre le détecteur DR sans fil et le réseau hospitalier sans fil

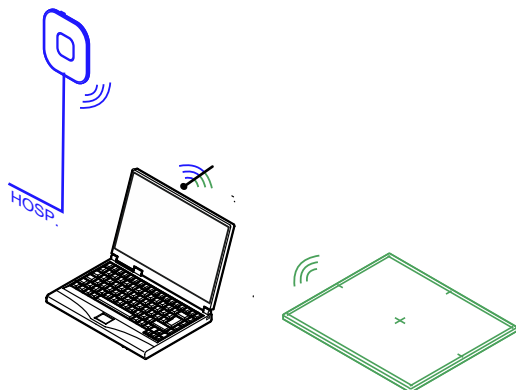


Illustration 1 : Les paramètres Wi-Fi de Windows permettent de basculer entre détecteur et réseau hospitalier

- [Bascule entre le détecteur DR sans fil et le réseau sans fil de l'hôpital](#) à la page 4

Bascule entre le détecteur DR sans fil et le réseau sans fil de l'hôpital

Il est possible de configurer le MUSICA Acquisition Workstation afin de le connecter à un détecteur DR sans fil ainsi qu'au réseau sans fil de l'hôpital.

Dans une configuration sans unité de commande du système ou sans point d'accès sans fil connecté au poste de travail, le détecteur DR communique via l'adaptateur sans fil interne du MUSICA Acquisition Workstation. Une seule connexion peut être active à la fois. L'utilisateur doit manuellement passer de la connexion sans fil au réseau hospitalier et de la connexion sans fil au détecteur DR.



Avertissement : Si la connexion réseau est interrompue, le MUSICA Acquisition Workstation peut se reconnecter à un autre point d'accès si l'option **Se connecter automatiquement**

dans les paramètres Wi-Fi de Windows est activée. N'activez pas l'option **Se connecter automatiquement** lorsque vous vous connectez au réseau de l'hôpital ou à un détecteur DR.

Pour basculer entre les réseaux sans fil :

1. Balayez depuis le côté droit de l'écran.

Le **Centre de notifications** Windows s'affiche.

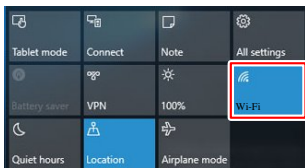


Illustration 2 : Centre de notification Windows avec le bouton Wi-Fi mis en évidence

2. Touchez le bouton **Wi-Fi**
Les réseaux sans fil disponibles s'affichent.
3. Sélectionnez le réseau sans fil.

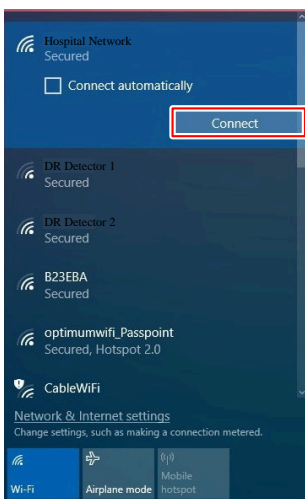


Illustration 3 : Réseaux sans fil disponibles

- Pour vous connecter au réseau hospitalier, sélectionnez le nom du réseau de l'hôpital.
Le MUSICA Acquisition Workstation est connecté au réseau de l'hôpital pour récupérer les données du SIR ou pour imprimer ou archiver des images.
Aucune communication vers le détecteur DR n'est possible, aucune exposition ne peut être effectuée.
 - Pour vous connecter au détecteur DR sans fil, sélectionnez le nom du détecteur.
Le MUSICA Acquisition Workstation est connecté au détecteur DR pour réaliser des expositions.
Aucune communication vers le réseau de l'hôpital n'est possible, par exemple vers le SIR ou le PACS.
4. Touchez le bouton **Connecter**.
La connexion au réseau passe au réseau sans fil sélectionné.