


Notebook/tablet s externím přístupovým bodem (Edimax)

Uživatelská příručka

Obsah

Právní upozornění.....	3
Konfigurace.....	3
Přístupový bod připojený k pracovní pomoci síťového kabelu.....	4

Právní upozornění

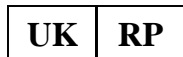

Agfa HealthCare UK Limited, 515 Coldhams Lane, CB1 3JS Cambridge, Cambridgeshire, UK

 Agfa NV, Septestraat 27, 2640 Mortsel - Belgie

Více informací o výrobcích společnosti Agfa naleznete na internetových stránkách agfaradiology-solutions.com.

Agfa a kosočtverec Agfa jsou ochranné známky společnosti Agfa-Gevaert N.V., Belgie nebo jejích poboček. NX a MUSICA jsou ochranné známky společnosti Agfa NV, Belgie nebo některé z jejích poboček. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných majitelů a slouží pouze k informačním účelům, bez jakéhokoli úmyslu porušení s nimi souvisejících práv.

Společnost Agfa NV neposkytuje žádné záruky ani nečiní žádná prohlášení, ať již výslovná nebo předpokládaná, pokud jde o přesnost, úplnost nebo využitelnost informací uvedených v tomto dokumentu, a výslovně se zříká záruk za vhodnost pro využití k jakémukoli specifickému účelu. Některé produkty a služby nemusí být ve vaší zemi dostupné. Související informace získáte u svého místního obchodního zástupce. Společnost Agfa NV se snaží o poskytování co možná nejpřesnějších informací. Neodpovídá však za žádné typografické chyby. Společnost Agfa NV za žádných okolností neodpovídá za škody vzniklé použitím nebo nemožností využít jakékoli informace, zařízení, metody nebo postupy uvedené v tomto dokumentu. Společnost Agfa NV si vyhrazuje právo na změny v tomto dokumentu bez předchozího upozornění. Původní verze tohoto dokumentu je v anglickém jazyce.

Copyright 2024 Agfa NV

Všechna práva vyhrazena.

Vydavatel: Agfa NV

2640 Mortsel - Belgie.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být v žádné formě ani žádným způsobem reprodukována, kopírována, upravována nebo rozšiřována bez předchozího písemného souhlasu společnosti Agfa NV.

Konfigurace

Aplikace Mobile DR a Ultra Mobile DR obsahují bezdrátový DR detektor, přenosnou pracovní stanicí MUSICA Acquisition a poskytují bezdrátovou komunikaci mezi detektorem a pracovní stanicí a mezi pracovní stanicí a nemocniční sítí.

V závislosti na konfiguraci vyžaduje správa síťových připojení interakci uživatele.

V konfiguraci Mobile DR je pracovní stanice MUSICA Acquisition implementována v přenosném počítači.

V konfiguraci Ultra Mobile DR je pracovní stanice MUSICA Acquisition implementována v tabletu.

Bezpečnostní pokyny, předpokládaný účel použití a všeobecné pokyny k obsluze naleznete v uživatelské dokumentaci k DR detektoru.

Přístupový bod připojený k pracovní pomoci síťového kabelu

DR detektory:

- DR 10s, DR 14s
- DR 10e, DR 14e, DR 17e
- DX-D 40C, DX-D 40G, DX-D 45C, DX-D 45G
- XD 10, XD*10, XD 14, XD*14, XD 17, XD*17
- XF*10, XF*14, XF*17

Pracovní stanice komunikuje s detektorem prostřednictvím přístupového bodu. Pracovní stanice komunikuje s bezdrátovou nemocniční sítí prostřednictvím interního adaptéru Wi-Fi. Obě připojení jsou aktivní současně.

Správa síťových připojení nevyžaduje žádnou interakci uživatele.



Obrázek 1: Přístupový bod připojený k pracovní pomoci síťového kabelu

Příklad přístupového bodu, který lze v této konfiguraci používat: Edimax 6288.