


Notebook/tablet com detector como ponto de acesso

Manual do usuário


Conteúdo

Aviso Legal.....	3
Configuração.....	3
Sem hardware de Wi-Fi adicional - detector como ponto de acesso.....	4
Comutação entre o detector de DR sem fios e a rede hospitalar sem fios.....	4

Aviso Legal

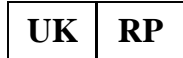

Agfa HealthCare UK Limited, 515 Coldhams Lane, CB1 3JS Cambridge, Cambridgeshire, UK

 Agfa NV, 27 de setembro, 2640 Mortsel - Bélgica

Para mais informações sobre produtos Agfa, acesse agfaradiologysolutions.com.

Agfa e o losango Agfa são marcas comerciais da Agfa-Gevaert N.V., Bélgica ou das suas filiais. NX e MUSICA são marcas comerciais da Agfa NV, Bélgica ou de uma das suas filiais. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respetivos titulares e são utilizadas para fins editoriais e sem intenção de infringir a lei.

A Agfa NV não concede qualquer garantia ou representação, expressa ou implícita, relativamente à precisão, integridade ou utilidade da informação contida neste documento e renuncia especificamente garantias de adaptabilidade a qualquer fim particular. Produtos e serviços podem não estar disponíveis para sua área local. Fale com seu representante de vendas para obter informações sobre a disponibilidade. A Agfa NV esforça-se diligentemente em fornecer informações o mais precisas possível, mas não se responsabiliza por erros tipográficos. A Agfa NV não será, em qualquer circunstância, responsável por qualquer dano causado pela utilização ou impossibilidade de utilização de qualquer informação, aparelho, método ou processo descritos neste documento. A Agfa NV reserva-se o direito de efetuar alterações neste documento sem aviso prévio. A versão original deste documento está em inglês.

Copyright 2024 Agfa NV

Todos os direitos reservados.

Publicado pela Agfa NV

2640 Mortsel - Bélgica.

Nenhuma parte deste documento poderá ser reproduzida, copiada, adaptada ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio sem a autorização por escrito da Agfa NV

Configuração

As aplicações DR Móvel e DR Ultra Móvel contêm um detector de DR sem fios e uma estação de trabalho MUSICA Acquisition notebook, e fornecem uma conexão sem fios entre o detector e a estação de trabalho, e entre a estação de trabalho e a rede hospitalar.

Dependendo da configuração, poderá ser necessária a interação do usuário para gerenciar as conexões de rede.

Em uma configuração de DR Móvel, a estação de trabalho MUSICA Acquisition é executada em um notebook.

Em uma configuração de DR Ultra Móvel, a estação de trabalho MUSICA Acquisition é executada em um Tablet.

Consulte a documentação do usuário do detector de DR para as instruções de segurança, a utilização pretendida e as instruções gerais de funcionamento.

Sem hardware de Wi-Fi adicional - detector como ponto de acesso

Detectores de DR:

- DX-D 40C, DX-D 40G, DX-D 45C, DX-D 45G
- XD10, XD*10, XD14, XD*14, XD17, XD*17
- XF*10, XF*14, XF*17

Apenas para o Windows 10.

A estação de trabalho se comunica com o detector e com a rede hospitalar sem fios através do adaptador de Wi-Fi interno. O detector será configurado de forma a atuar como um ponto de acesso. Apenas pode estar ativa uma conexão de cada vez.

O usuário deve usar as definições do Wi-Fi do Windows para alternar entre o detector de DR sem fios e a rede hospitalar sem fios

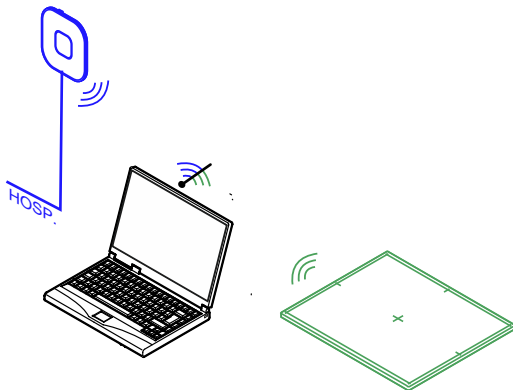


Figura 1: As definições do Wi-Fi do Windows permitem alternar entre a rede do detector e a rede hospitalar

- [Comutação entre o detector de DR sem fios e a rede hospitalar sem fios](#) na página 4

Comutação entre o detector de DR sem fios e a rede hospitalar sem fios

A MUSICA Acquisition Workstation pode ser configurada para ligar-se a um detector de DR sem fios, bem como a uma rede hospitalar sem fios.

Em uma configuração sem uma unidade de controle do sistema ou de um ponto de acesso sem fios que esteja ligado à estação de trabalho, o detector de DR se comunica através de um adaptador sem fios interno da MUSICA Acquisition Workstation. Apenas pode estar ativa uma conexão de cada vez. O usuário deve manualmente alternar entre a conexão sem fios à rede hospitalar e a conexão sem fios ao detector de DR.



Atenção: Se a conexão à rede for interrompida, a MUSICA Acquisition Workstation pode voltar a ligar-se a um ponto de acesso diferente, se a opção **Conexão automática** nas definições de Wi-Fi do Windows estiverem ativas. Não ative a opção **Conexão automática** quando se conectar à rede hospitalar ou a um detector de DR.

Para alternar entre redes sem fios:

1. Deslize a partir do lado direito da tela.

O **centro de ação** do Windows é apresentado.

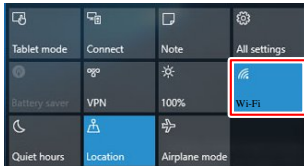


Figura 2: Centro de ação do Windows com o botão Wifi realçado

2. Toque no botão **Wifi**
São apresentadas as redes sem fios disponíveis.
3. Selecione a rede sem fios.

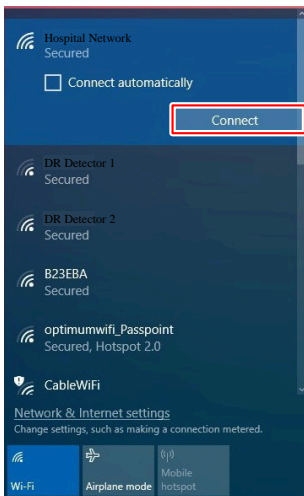


Figura 3: Redes sem fios disponíveis

- Para fazer a conexão à rede hospitalar, selecione o nome da rede hospitalar.
A MUSICA Acquisition Workstation está ligada à rede hospitalar, para recuperar dados do RIS ou para imprimir ou arquivar imagens.
Não é possível comunicar-se com o detector de DR, não podem ser realizadas exposições.
 - Para se conectar ao detector de DR sem fios, selecione o nome do detector.
A MUSICA Acquisition Workstation está conectada ao detector de DR para efetuar exposições.
Não é possível estabelecer a comunicação com a rede hospitalar, por ex. ao RIS ou ao PACS.
4. Toque no botão **Conectar**.
A conexão à rede é comutada para a rede sem fios selecionada.