

# **Portátil/tablet com ponto de acesso externo (Edimax)**

---


## **Manual do utilizador**

# Índice

<b>Aviso legal.....</b>	<b>3</b>
<b>Configuração.....</b>	<b>3</b>
<b>Ponto de acesso ligado à estação de trabalho através do cabo de rede.....</b>	<b>4</b>

## Aviso legal

---

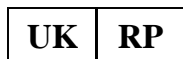

Agfa HealthCare UK Limited, 515 Coldhams Lane, CB1 3JS Cambridge, Cambridgeshire, UK

 Agfa NV, Septestraat 27, 2640 Mortsel - Bélgica

Para mais informações sobre produtos Agfa, vá a [agfaradiologysolutions.com](http://agfaradiologysolutions.com).

Agfa e Agfa rhombus são marcas comerciais da Agfa-Gevaert N.V., Bélgica ou das suas filiais. NX e MUSICA são marcas comerciais da Agfa NV, Bélgica ou de uma das suas filiais. As restantes marcas comerciais são propriedade dos respetivos titulares e são utilizadas de uma perspetiva editorial sem intenção de infração.

A Agfa NV não concede qualquer garantia ou representação, expressa ou implícita, relativamente à precisão, integridade ou utilidade da informação contida neste documento e renuncia especificamente garantias de adaptabilidade a qualquer fim particular. Os produtos e serviços podem não se encontrar disponíveis para a sua região mundial. Contacte o revendedor local para informações sobre a disponibilidade. A Agfa NV esforça-se por fornecer informações tão precisas quanto possível, mas não é responsável por quaisquer erros tipográficos. A Agfa NV não será, em qualquer circunstância, responsável por qualquer dano causado pela utilização ou impossibilidade de utilização de qualquer informação, aparelho, método ou processo descritos neste documento. A Agfa NV reserva-se o direito de efetuar alterações neste documento sem aviso prévio. A versão original deste documento está em inglês.

Direitos de autor 2024 Agfa NV

Todos os direitos reservados.

Publicado pela Agfa NV

2640 Mortsel - Bélgica.

Nenhuma parte deste documento poderá ser reproduzida, copiada, adaptada ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio sem a autorização por escrito da Agfa NV

## Configuração

---

As aplicações DR Móvel e DR Ultra Móvel contêm um detetor DR sem fios e uma estação de trabalho MUSICA Acquisition portátil, e fornecem uma ligação sem fios entre o detetor e a estação de trabalho, e entre a estação de trabalho e a rede hospitalar.

Dependendo da configuração, poderá ser necessária a interação do utilizador para gerir as ligações de rede.

Numa configuração de DR Móvel, a estação de trabalho MUSICA Acquisition é executada num computador portátil.

Numa configuração de DR Ultra Móvel, a estação de trabalho MUSICA Acquisition é executada num tablet.

Consulte a documentação do utilizador do detetor DR para as instruções de segurança, a utilização pretendida e as instruções gerais de funcionamento.

## Ponto de acesso ligado à estação de trabalho através do cabo de rede


---

Detectores DR:

- DR 10s, DR 14s
- DR 10e, DR 14e, DR 17e
- DX-D 40C, DX-D 40G, DX-D 45C, DX-D 45G
- XD 10, XD\*10, XD 14, XD\*14, XD 17, XD\*17
- XF\*10, XF\*14, XF\*17

A estação de trabalho comunica com o detetor através do ponto de acesso. A estação de trabalho comunica com a rede hospitalar sem fios através do adaptador de Wi-Fi interno. Ambas as ligações ficam ativas em simultâneo.

**Não é necessária nenhuma interação do utilizador para gerir as ligações de rede.**

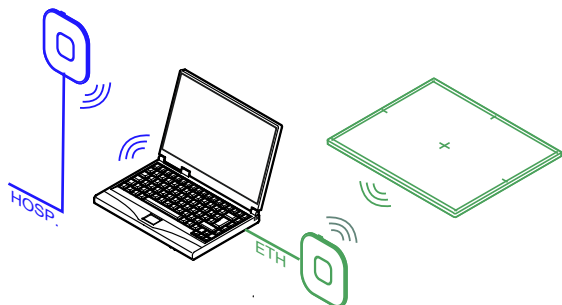

**Figura 1: Ponto de acesso ligado à estação de trabalho através do cabo de rede**

Exemplo do ponto de acesso que pode ser usado nesta configuração: Edimax 6288.