


Eriřim noktası olarak dedektö- re sahip dizüstü bilgisayar/tablet

Kullanıcı Kılavuzu

İçindekiler

Yasal Uyarı.....	3
Yapılandırma.....	3
Ekstra WiFi donanımı gerekmez - erişim noktası olarak dedektör.....	4
Kablosuz DR dedektörü ile kablosuz hastane ağı arasında geçiş yapılması.....	4

Yasal Uyarı

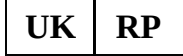

Agfa HealthCare UK Limited, 515 Coldhams Lane, CB1 3JS Cambridge, Cambridgeshire, UK

 Agfa NV, Septestraat 27, 2640 Mortsel - Belçika

Agfa ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen agfaradiologysolutions.com sitesini ziyaret edin.

Agfa ve Agfa rhombus, Agfa-Gevaert N.V.'nin (Belçika) ya da yan kuruluşlarının ticari markalarıdır. NX ve MUSICA, Agfa NV'nin (Belçika) ya da yan kuruluşlarının ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili marka sahiplerine ait olup, ihlal amacı olmaksızın yazı işlerinde kullanılmaktadır.

Agfa NV şirketi bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü veya faydalı olmasıyla ilgili gizli veya açık hiçbir garanti vermemekte veya bunu ifade etmemektedir ve özellikle herhangi bir amaç için uygun olduğunu belirtilen garantileri kabul etmemektedir. Ürünler veya hizmetler bulunduğunuz bölgede bulunmayabilir. Mevcut olup olmadıkları hakkında bilgi almak için lütfen yerel satış temsilcinizle görüşün. Agfa NV mümkün olduğunca doğru bilgi sunmak için özenle çalışır; ancak, herhangi bir yazım yanlışından dolayı sorumlu tutulamaz. Agfa NV şirketi, bu belgede açıklanan bilgilerin, aygıtların, yöntem ve işlemlerin kullanımından veya kullanılamamasından doğan hiçbir zarardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Agfa NV şirketi, bu belgeye daha önce haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu dokümanın orijinal versiyonu İngilizce'dir.

Telif Hakkı 2024 Agfa NV

Tüm hakları saklıdır.

Agfa NV tarafından basılmıştır

2640 Mortsel - Belçika.

İşbu dokümanın hiçbir bölümü, Agfa NV'nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz, kopyalanamaz, uyarlanamaz veya herhangi biçimde veya herhangi bir yolla iletilemez

Yapılandırma

Mobil DR ve Ultra Mobil DR uygulamaları bir kablosuz DR dedektörü ve bir portatif MUSICA Acquisition iş istasyonu içerir ve dedektör ile iş istasyonu ve iş istasyonu ile hastane ağı arasında kablosuz iletişim sağlar.

Yapılandırmaya bağlı olarak ağ bağlantılarının yönetilmesi için bir kullanıcı etkileşimi gereklidir.

Bir Mobil DR yapılandırmasında, MUSICA Acquisition iş istasyonu bir dizüstü bilgisayara dağıtılır.

Bir Ultra Mobil DR yapılandırmasında, MUSICA Acquisition iş istasyonu bir tablet bilgisayara dağıtılır.

Güvenlik talimatları, kullanım amacı ve genel işletim talimatları için DR dedektörünün kullanıcı dokümantasyonuna başvurun.

Ekstra WiFi donanımı gerekmez - erişim noktası olarak dedektör


DR dedektörleri:

- DX-D 40C, DX-D 40G, DX-D 45C, DX-D 45G
- XD 10, XD*10, XD 14, XD*14, XD 17, XD*17
- XF*10, XF*14, XF*17

Yalnızca Windows 10 içindir.

İş istasyonu dedektör ve kablosuz hastane ağı ile dahili wifi adaptörü aracılığıyla iletişim kurar. Dedektör bir erişim noktası olarak işlev görecektir. Bir seferde yalnızca bir bağlantı etkin olabilir.

Kullanıcı, kablosuz DR dedektör ile kablosuz hastane ağı arasında geçiş yapmak için Windows WiFi ayarlarını kullanmalıdır

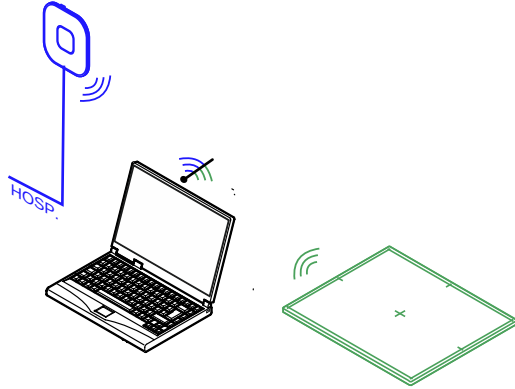

Şekil 1: Windows'taki WiFi ayarları, dedektör ve hastane ağı arasında geçiş yapılmasına olanak tanır

- [Kablosuz DR dedektörü ile kablosuz hastane ağı arasında geçiş yapılması](#) sayfa 4

Kablosuz DR dedektörü ile kablosuz hastane ağı arasında geçiş yapılması

MUSICA Acquisition Workstation, bir kablosuz hastane ağının yanı sıra bir kablosuz DR dedektörüne bağlanmak üzere yapılandırılabilir.

Sistem Kontrol Ünitesi olmayan veya iş istasyonuna bağlı bir kablosuz erişim noktasının bulunmadığı bir yapılandırmada DR dedektörü, MUSICA Acquisition Workstation'da dahili kablosuz adaptörü üzerinden iletişim kurar. Bir seferde yalnızca bir bağlantı etkin olabilir. Kullanıcının hastane ağı kablosuz bağlantısı ile DR dedektörü kablosuz bağlantısı arasında manuel olarak geçiş yapması gerekir.




Uyarı: Ağ bağlantısı kesilirse MUSICA Acquisition Workstation, Windows wifi ayarlarında **Otomatik olarak bağlan** seçeneği etkinleştirilmişse farklı bir erişim noktasına bağlanabilir.

Hastane ağına veya bir DR dedektörüne bağlanırken **Otomatik olarak bağlan** seçeneğini etkinleştirmeyin.

Kablosuz ağlar arasında geçiş yapmak için:


1. Ekranın sağ tarafından içeri çekin.

Windows **işlem merkezi** görüntülenir.

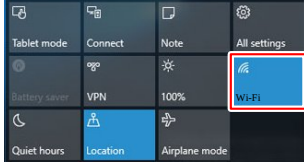

Şekil 2: Wifi düğmesi vurgulanmış Windows işlem merkezi

2. **Wifi** düğmesine dokunun
Kullanılabilir kablosuz ağlar görüntülenir.
3. Kablosuz ağı seçin.

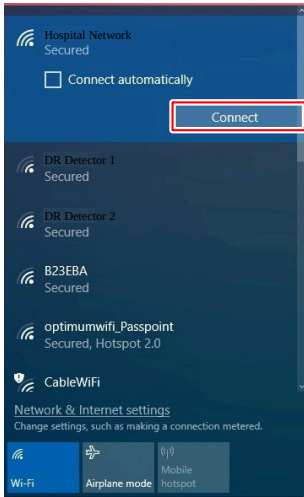

Şekil 3: Kullanılabilir kablosuz ağlar

- Hastane ağına bağlanmak için hastane ağı adını seçin.
MUSICA Acquisition Workstation RIS'den veri almak için veya görüntüleri yazdırmak veya arşivlemek için hastane ağına bağlanır.
DR Dedektörüyle iletişim mümkün değil, hiç pozlama gerçekleştirilemez.
 - Kablosuz DR Dedektöre bağlanmak için dedektör adını seçin.
MUSICA Acquisition Workstation ışınlama yapmak için DR Dedektörüne bağlanır.
Hastane ağıyla örn. RIS veya PACS ile iletişim mümkün değil.
4. **Bağlan** düğmesine dokunun.
Ağ bağlantısı seçilen kablosuz ağa geçirilir.