


Laptop/táblagép külső hozzáférési ponttal (Edimax)

Felhasználói kézikönyv


Tartalomjegyzék

Jogi megjegyzések.....	3
Konfiguráció.....	3
A munkaállomáshoz hálózati kábelen keresztül csatlakoztatott hozzáférési pont.....	4

Jogi megjegyzések

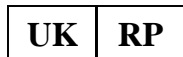

Agfa HealthCare UK Limited, 515 Coldhams Lane, CB1 3JS Cambridge, Cambridgeshire, UK

 Agfa NV, Septestraat 27, 2640 Mortsel - Belgium

Az Agfa termékeiről további információkat a [agfaradiologysolutions.com](https://www.agfaradiologysolutions.com) weboldalon olvashat.

Az Agfa és az Agfa rombusz az Agfa-Gevaert N.V. (Belgium) vagy valamelyik társvállalatának védjegye. Az NX és a MUSICA az Agfa NV (Belgium) vagy valamelyik társvállalatának védjegye. Minden más védjegy az adott tulajdonos tulajdonát képezi, melyet kiadványszerkesztési céllal, törvénytértés szándéka nélkül használunk.

Az Agfa NV nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát vagy képviseletet a jelen dokumentumban szereplő információk pontosságára, teljességére vagy hasznosságára vonatkozóan, és különösen nem vállal garanciát a bemutatott termék bármely adott célra való megfelelésére. Egyes termékek és szolgáltatások esetleg nem állnak rendelkezésre az Ön régiójában. A rendelkezésre állással kapcsolatban bővebben a helyi értékesítési képviselő tud felvilágosítással szolgálni. Az Agfa NV kifejezetten törekszik a lehető legpontosabb információk közlésére, de nem vállal semmilyen felelősséget az esetleges nyomdahibákért. Az Agfa NV semmilyen körülmények között nem tartozik felelősséggel a jelen dokumentumban közzétett bármely információ, berendezés, módszer vagy eljárás használatából vagy használhatatlanságából eredő bármely kárért. Az Agfa NV fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban előzetes figyelmeztetés nélkül bármilyen változást eszközöljön. A dokumentum eredeti változata angol nyelvű.

Szerzői jog 2024 Agfa NV

Minden jog fenntartva.

Kiadja az Agfa NV

2640 Mortsel - Belgium.

A jelen dokumentum egyetlen része sem sokszorosítható, másolható, módosítható vagy továbbítható semmilyen formában és semmilyen módon az Agfa NV írásbeli engedélye nélkül.

Konfiguráció

A Mobile DR és az Ultra Mobile DR alkalmazások egy vezeték nélküli DR detektort és egy hordozható MUSICA Acquisition munkaállomást tartalmaznak, és vezeték nélküli adatátvitelt biztosítanak a detektor és a munkaállomás, illetve a munkaállomás és a kórházi hálózat között.

A konfigurációtól függően felhasználói beavatkozás szükséges a hálózati kapcsolatok kezeléséhez.

A Mobile DR konfiguráció esetén a MUSICA Acquisition munkaállomást egy laptop számítógépre telepítik.

Az Ultra Mobile DR konfiguráció esetén a MUSICA Acquisition munkaállomást egy táblagép számítógépre telepítik.

A biztonsági előírások, a rendeltetésszerű felhasználás és az általános biztonsági előírások megismeréséhez hivatkozzon a DR detektor felhasználói dokumentációjára.


A munkaállomáshoz hálózati kábelen keresztül csatlakoztatott hozzáférési pont

DR-detektorok:

- DR 10s, DR 14s
- DR 10e, DR 14e, DR 17e
- DX-D 40C, DX-D 40G, DX-D 45C, DX-D 45G
- XD 10, XD*10, XD 14, XD*14, XD 17, XD*17
- XF*10, XF*14, XF*17

A munkaállomás a hozzáférési ponton keresztül kommunikál a detektorral. A munkaállomás a belső Wi-Fi adapterén keresztül kommunikál a vezeték nélküli kórházi hálózattal. Mindkét csatlakozás egyszerre aktív.

Nincs szükség felhasználói beavatkozásra a hálózati kapcsolatok kezeléséhez.

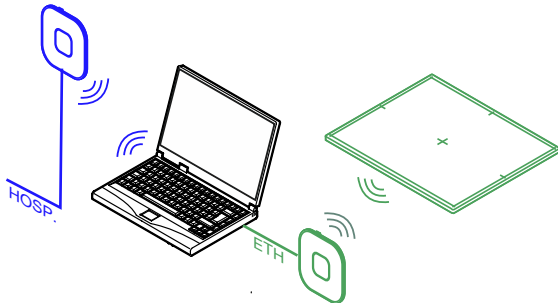

ábra 1: A munkaállomáshoz hálózati kábelen keresztül csatlakoztatott hozzáférési pont

Példa a jelen konfiguráció esetén használható hozzáférési pontra: Edimax 6288.