

# Bærbar datamaskin / nettbrett med eksternt tilgangspunkt (Edimax)

---


## Bruksanvisning

# Innhold

Juridisk merknad.....	3
Konfigurasjon.....	3
Tilgangspunkt tilkoblet arbeidsstasjon via nettverkskabel.....	4

## Juridisk merknad

---

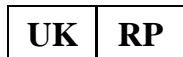

Agfa HealthCare UK Limited, 515 Coldhams Lane, CB1 3JS Cambridge, Cambridgeshire, UK



Agfa NV, Septestraat 27, 2640 Mortselsel – Belgia

Hvis du vil vite mer om Agfa-produkter, kan du gå til [agfaradiologysolutions.com](https://www.agfaradiologysolutions.com).

Agfa og Agfa-romben er varemerker for Agfa-Gevaert N.V. i Belgia eller dets datterselskaper. NX og MUSICA er varemerker for Agfa NV, i Belgia eller et av dets datterselskaper. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne og brukes på en redaksjonell måte uten å ha til hensikt å krenke opphavsretten.

Agfa NV gir ingen garanti, verken uttrykt eller underforstått, hva angår nøyaktigheten, fullstendigheten eller nytteverdien av opplysningene som er gitt i dette dokumentet, og spesielt hva angår egenheten til et bestemt formål. Det kan hende enkelte produkter eller tjenester ikke er tilgjengelig i ditt lokale område. Kontakt din lokale salgsrepresentant for å få tilgjengelig informasjon. Agfa NV bestreber seg til det ytterste for å gi så nøyaktig informasjon som mulig, men tar ikke på seg ansvar for eventuelle typografiske feil. Agfa NV vil under ingen omstendigheter være ansvarlig for skader som oppstår ved bruk eller mangelfull bruk av noen form for informasjon, apparat, metode eller prosess som er beskrevet i dette dokumentet. Agfa NV forbeholder seg retten til å foreta endringer i dette dokumentet uten forvarsel. Originalversjonen av dette dokumentet er på engelsk.

Copyright 2024 Agfa NV

Med enerett.

Publisert av Agfa NV

2640 Mortselsel – Belgia.

Ingen del av dette dokumentet må gjengis, kopieres, tilpasses eller videreformidles i noen som helst form eller på noen som helst måte uten skriftlig tillatelse fra Agfa NV

## Konfigurasjon

---

Mobil DR and Ultramobil DR applikasjonene inneholder en trådløs DR-detektor og en bærbar MUSICA Acquisition-arbeidsstasjon og gir trådløs kommunikasjon mellom detektoren og arbeidsstasjonen, og mellom arbeidsstasjonen og sykehusnettverket.

Avhengig av konfigurasjonen, er brukerinteraksjon nødvendig for å administrere nettverkstilkoblingene.

I en konfigurasjon av Mobil DR, er MUSICA Acquisition-arbeidsstasjonen tatt i bruk på en bærbar datamaskin.

I en konfigurasjon av Ultramobil DR, er MUSICA Acquisition-arbeidsstasjonen tatt i bruk på et nettbrett.

Referer til brukerdokumentasjonen til DR-detektoren for sikkerhetsanvisninger, bruksområde og generelle instruksjoner for bruk.

## Tilgangspunkt tilkoblet arbeidsstasjon via nettverkskabel


---

DR-detektorer:

- DR 10s, DR 14s
- DR 10e, DR 14e og DR 17e
- DX-D 40C, DX-D 40G, DX-D 45C, DX-D 45G
- XD 10, XD\*10, XD 14, XD\*14, XD 17, XD\*17
- XF\*10, XF\*14, XF\*17

Arbeidsstasjonen kommuniserer til detektoren via tilgangspunktet. Arbeidsstasjonen kommuniserer til det trådløse sykehusnettverket via den interne Wi-Fi-adapteren. Begge tilkoblingene er aktiv samtidig.

**Ingen brukerinteraksjon er nødvendig for å administrere nettverkstilkoblingene.**

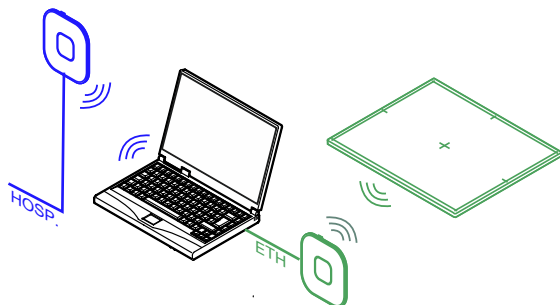

**Figur 1: Tilgangspunkt tilkoblet arbeidsstasjon via nettverkskabel**

Eksempel på tilgangspunkt som kan brukes i denne konfigurasjonen: Edimax 6288.