


**Φορητός υπολογιστής/tablet με
ανιχνευτή ως σημείο πρόσβασης**

Εγχειρίδιο χρήστη

Περιεχόμενα

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου.....	3
Διαμόρφωση.....	3
Δεν υπάρχει επιπλέον υλικό wifi - ανιχνευτής ως σημείο πρόσβασης.....	4
Εναλλαγή ανάμεσα στον ασύρματο ανιχνευτή DR και το ασύρματο δίκτυο του νοσοκομείου.....	4

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

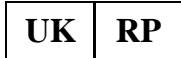

Agfa HealthCare UK Limited, 515 Coldhams Lane, CB1 3JS Cambridge, Cambridgeshire, UK

 Agfa NV, Septestraat 27, 2640 Mortsel - Βέλγιο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Agfa, επισκεφθείτε την τοποθεσία agfaradiologysolutions.com.

Η ονομασία Agfa και ο ρόμβος Agfa είναι εμπορικά σήματα της Agfa-Gevaert N.V., Βελγίου ή των θυγατρικών της εταιρειών. Τα NX και MUSICA είναι εμπορικά σήματα της Agfa NV, Βελγίου ή μίας εκ των θυγατρικών της εταιρειών. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους και χρησιμοποιούνται για σκοπούς σύνταξης του εγγράφου, χωρίς πρόθεση παραβίασης των σχετικών δικαιωμάτων.

Η Agfa NV δεν παρέχει εγγυήσεις ή αντιπροσώπευση, ρητή ή υπονοούμενη, όσον αφορά την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο έντυπο αυτό και αποκηρύσσει συγκεκριμένα εγγυήσεις καταλληλότητας για οποιονδήποτε ιδιαίτερο σκοπό. Ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες ίσως να μην είναι διαθέσιμα στη γεωγραφική σας περιοχή. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας εκπρόσωπο πωλήσεων για πληροφορίες διαθεσιμότητας. Η Agfa NV προσπαθεί συνεχώς να παρέχει όσο το δυνατό πιο ακριβείς πληροφορίες, αλλά δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε τυπογραφικό λάθος. Η Agfa NV δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης οποιασδήποτε πληροφορίας, συσκευής, μεθόδου ή διαδικασίας περιγράφεται στο παρόν έντυπο. Η Agfa NV διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στο έντυπο αυτό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η αρχική έκδοση αυτού του εγγράφου είναι στα αγγλικά.

Copyright 2024 Agfa NV

Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Έκδοση της Agfa NV

2640 Mortsel - Βέλγιο.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η προσαρμογή ή η μεταβίβαση σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο του εντύπου αυτού χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Agfa NV

Διαμόρφωση

Οι εφαρμογές Mobile DR και Ultra Mobile DR περιέχουν έναν ασύρματο ανιχνευτή DR και έναν κινητό σταθμό εργασίας MUSICA Acquisition και παρέχουν ασύρματη επικοινωνία μεταξύ του ανιχνευτή και του σταθμού εργασίας και μεταξύ του σταθμού εργασίας και του δικτύου του νοσοκομείου.

Ανάλογα με τη διαμόρφωση, δεν απαιτείται παρέμβαση του χρήστη για τη διαχείριση των συνδέσεων δικτύου.

Σε μια διαμόρφωση Mobile DR, ο σταθμός εργασίας MUSICA Acquisition αναπτύσσεται σε έναν φορητό υπολογιστή.

Σε μια διαμόρφωση Ultra Mobile DR, ο σταθμός εργασίας MUSICA Acquisition αναπτύσσεται σε ένα tablet.

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση χρήστη του ανιχνευτή DR για να δείτε τις οδηγίες ασφαλείας, την προβλεπόμενη χρήση και τις γενικές οδηγίες λειτουργίας.

Δεν υπάρχει επιπλέον υλικό wifi - ανιχνευτής ως σημείο πρόσβασης


Ανιχνευτές DR:

- DX-D 40C, DX-D 40G, DX-D 45C, DX-D 45G
- XD 10, XD*10, XD 14, XD*14, XD 17, XD*17
- XF*10, XF*14, XF*17

Μόνο για Windows 10.

Ο σταθμός εργασίας επικοινωνεί με τον ανιχνευτή και το ασύρματο δίκτυο του νοσοκομείου μέσω του εσωτερικού προσαρμογέα wifi. Ο ανιχνευτής έχει διαμορφωθεί για να λειτουργεί ως σημείο πρόσβασης. Μόνο μία σύνδεση μπορεί να είναι ενεργή κάθε φορά.

Ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιήσει τις ρυθμίσεις wifi των Windows για εναλλαγή μεταξύ του ασύρματου ανιχνευτή DR και του ασύρματου δικτύου του νοσοκομείου

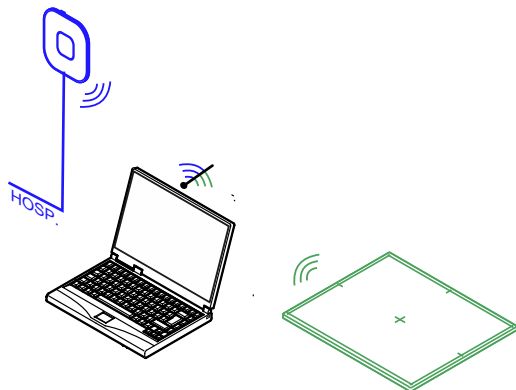

Σχήμα 1: Οι ρυθμίσεις wifi των Windows επιτρέπουν την εναλλαγή μεταξύ του ανιχνευτή και του δικτύου του νοσοκομείου

- [Εναλλαγή ανάμεσα στον ασύρματο ανιχνευτή DR και το ασύρματο δίκτυο του νοσοκομείου](#) στη σελίδα 4

Εναλλαγή ανάμεσα στον ασύρματο ανιχνευτή DR και το ασύρματο δίκτυο του νοσοκομείου

Ο MUSICA Acquisition Workstation μπορεί να παραμετροποιηθεί έτσι, ώστε να συνδέεται με έναν ασύρματο ανιχνευτή DR καθώς και με ένα ασύρματο δίκτυο νοσοκομείου.

Σε μια σύνθεση μηχανήματος χωρίς Μονάδα ελέγχου συστήματος ή χωρίς να υπάρχει σημείο ασύρματης πρόσβασης συνδεδεμένο στον σταθμό εργασίας, ο ανιχνευτής DR επικοινωνεί μέσω του εσω-


τερικού ασύρματου αντάπτορα του MUSICA Acquisition Workstation. Μόνο μία σύνδεση μπορεί να είναι ενεργή κάθε φορά. Ο χρήστης πρέπει να κάνει μη αυτόματα την εναλλαγή μεταξύ της ασύρματης σύνδεσης με το δίκτυο του νοσοκομείου και της ασύρματης σύνδεσης με τον ανιχνευτή DR.

⚠ Προειδοποίηση: Αν διακοπεί η σύνδεση δικτύου, ο MUSICA Acquisition Workstation ενδέχεται να επανασυνδεθεί σε διαφορετικό σημείο πρόσβασης αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Σύνδεση αυτόματα** στις ρυθμίσεις Wi-Fi των Windows. Μην ενεργοποιήσετε την επιλογή **Σύνδεση αυτόματα** όταν συνδέεστε στο δίκτυο του νοσοκομείου ή σε ανιχνευτή DR.

Για εναλλαγή μεταξύ των ασύρματων δικτύων:


1. Σαρώστε με το δάχτυλό σας από τα δεξιά της οθόνης.

Εμφανίζεται το **κέντρο ενεργειών των Windows**.

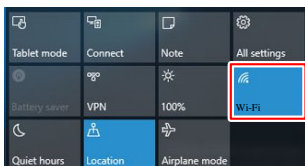

Σχήμα 2: Κέντρο ενεργειών των Windows με το κουμπί Wifi επισημασμένο

2. Πατήστε το κουμπί **Wifi**
Εμφανίζονται τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα.
3. Επιλέξτε το ασύρματο δίκτυο.

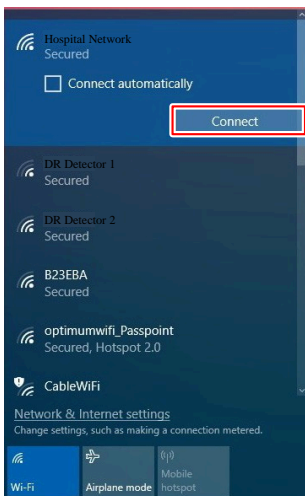

Σχήμα 3: Διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα

- Για να συνδεθείτε με το δίκτυο του νοσοκομείου, επιλέξτε το όνομα του δικτύου του νοσοκομείου.

Ο MUSICA Acquisition Workstation συνδέεται με το δίκτυο του νοσοκομείου για την ανάκτηση δεδομένων από το RIS ή για εκτύπωση ή αρχειοθέτηση εικόνων.

Δεν είναι δυνατή καμία επικοινωνία με τον ανιχνευτή DR και δεν μπορεί να εκτελεστεί καμία έκθεση.

- Για να συνδεθείτε με τον ασύρματο ανιχνευτή DR, επιλέξτε το όνομα του ανιχνευτή.

Ο MUSICA Acquisition Workstation συνδέεται με τον ανιχνευτή DR για τις εκθέσεις.

Δεν είναι δυνατή καμία επικοινωνία με το δίκτυο του νοσοκομείου, π.χ. με το RIS ή το PACS.

4. Πατήστε το κουμπί **Σύνδεση**.

Η σύνδεση δικτύου αλλάζει στο επιλεγμένο ασύρματο δίκτυο.