


Portátil o tableta con punto de acceso externo (Edimax)

Manual de uso


Contenido

Aviso legal.....	3
Configuración.....	3
Punto de acceso conectado a la estación de trabajo mediante un cable de red.....	4

Aviso legal

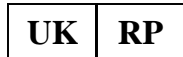

Agfa HealthCare UK Limited, 515 Coldhams Lane, CB1 3JS Cambridge, Cambridgeshire, UK

 Agfa NV, Septestraat 27, 2640 Mortsel - Bélgica

Para obtener más información sobre los productos de Agfa, visite agfaradiologysolutions.com.

Agfa y el rombo de Agfa son marcas comerciales de Agfa-Gevaert N.V., Bélgica o de sus filiales. NX y MUSICA son marcas comerciales de Agfa N.V., Bélgica o de alguna de sus filiales. El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios y se utilizan con fines editoriales sin intención de infringir derecho alguno.

Agfa NV no ofrece ninguna garantía implícita ni explícita con respecto a la exactitud, integridad o utilidad de la información contenida en este manual, y excluye explícitamente cualquier garantía de idoneidad para un fin determinado. Es posible que algunos productos y servicios no estén disponibles en su región. Póngase en contacto con el representante comercial de su localidad para obtener información sobre disponibilidad. Agfa NV se esfuerza diligentemente en proporcionar la información más precisa posible, pero no asume responsabilidad ante posibles errores de imprenta. Agfa NV no será considerada responsable bajo ninguna circunstancia por los daños que pudieran surgir a raíz del uso o de la incapacidad de usar adecuadamente los datos, aparatos, métodos o procesos descritos en este documento. Agfa NV se reserva el derecho de modificar este manual sin previo aviso. La versión original de este documento está en idioma inglés.

Copyright 2024 Agfa NV

Todos los derechos reservados.

Publicado por Agfa NV

2640 Mortsel - Bélgica.

Queda prohibida la reproducción, copia, adaptación o transmisión de cualquier parte de este documento, de cualquier forma y por cualquier medio, sin la autorización por escrito de Agfa NV.

Configuración

Las aplicaciones de Mobile DR y Ultra Mobile DR tienen un detector DR inalámbrico y una estación de trabajo MUSICA Acquisition portátil, y proporcionan comunicación inalámbrica entre el detector y la estación de trabajo y entre la estación de trabajo y la red hospitalaria.

Según la configuración, se necesita interacción del usuario para administrar las conexiones de red.

En una configuración de Mobile DR, la estación de trabajo MUSICA Acquisition se implementa en un ordenador portátil.

En una configuración de Ultra Mobile DR, la estación de trabajo MUSICA Acquisition se implementa en una tableta.

Consulte la documentación del usuario del detector DR para obtener pautas de seguridad y de uso previsto e instrucciones generales de operación.

Punto de acceso conectado a la estación de trabajo mediante un cable de red

Detectores DR:

- DR 10s, DR 14s
- DR 10e, DR 14e, DR 17e
- DX-D 40C, DX-D 40G, DX-D 45C y DX-D 45G
- XD 10, XD*10, XD 14, XD*14, XD 17, XD*17
- XF*10, XF*14, XF*17

La estación de trabajo se comunica con el detector mediante el punto de acceso. La estación de trabajo se comunica con la red hospitalaria inalámbrica mediante el adaptador interno de wifi. Ambas conexiones están activas al mismo tiempo.

No se necesita interacción del usuario para administrar las conexiones de red.

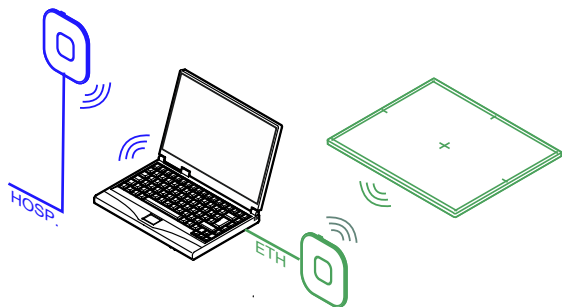


Figura 1: Punto de acceso conectado a la estación de trabajo mediante un cable de red

Ejemplo de punto de acceso que se puede utilizar en esta configuración: Edimax 6288.