


**Laptop/táblagép detektorral,
hozzáférési pontként**

Felhasználói kézikönyv


Tartalomjegyzék

Jogi megjegyzések.....	3
Konfiguráció.....	3
Nincs extra Wi-Fi hardver - detektor mint hozzáférési pont.....	4
Váltás a vezeték nélküli DR detektor és a vezeték nélküli kórházi hálózat között.....	4

Jogi megjegyzések

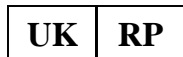

Agfa HealthCare UK Limited, 515 Coldhams Lane, CB1 3JS Cambridge, Cambridgeshire, UK

 Agfa NV, Septestraat 27, 2640 Mortsel - Belgium

Az Agfa termékeiről további információkat a [agfaradiologysolutions.com](https://www.agfaradiologysolutions.com) weboldalon olvashat.

Az Agfa és az Agfa rombusz az Agfa-Gevaert N.V. (Belgium) vagy valamelyik társvállalatának védjegye. Az NX és a MUSICA az Agfa NV (Belgium) vagy valamelyik társvállalatának védjegye. Minden más védjegy az adott tulajdonos tulajdonát képezi, melyet kiadványszerkesztési céllal, törvénytértés szándéka nélkül használunk.

Az Agfa NV nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát vagy képviselmet a jelen dokumentumban szereplő információk pontosságára, teljességére vagy hasznosságára vonatkozóan, és különösen nem vállal garanciát a bemutatott termék bármely adott célra való megfelelésére. Egyes termékek és szolgáltatások esetleg nem állnak rendelkezésre az Ön régiójában. A rendelkezésre állással kapcsolatban bővebben a helyi értékesítési képviselő tud felvilágosítással szolgálni. Az Agfa NV kifejezetten törekszik a lehető legpontosabb információk közlésére, de nem vállal semmilyen felelősséget az esetleges nyomdahibákért. Az Agfa NV semmilyen körülmények között nem tartozik felelősséggel a jelen dokumentumban közzétett bármely információ, berendezés, módszer vagy eljárás használatából vagy használhatatlanságából eredő bármely kárért. Az Agfa NV fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban előzetes figyelmeztetés nélkül bármilyen változást eszközöljön. A dokumentum eredeti változata angol nyelvű.

Szerzői jog 2024 Agfa NV

Minden jog fenntartva.

Kiadja az Agfa NV

2640 Mortsel - Belgium.

A jelen dokumentum egyetlen része sem sokszorosítható, másolható, módosítható vagy továbbítható semmilyen formában és semmilyen módon az Agfa NV írásbeli engedélye nélkül.

Konfiguráció

A Mobile DR és az Ultra Mobile DR alkalmazások egy vezeték nélküli DR detektort és egy hordozható MUSICA Acquisition munkaállomást tartalmaznak, és vezeték nélküli adatátvitelt biztosítanak a detektor és a munkaállomás, illetve a munkaállomás és a kórházi hálózat között.

A konfigurációtól függően felhasználói beavatkozás szükséges a hálózati kapcsolatok kezeléséhez.

A Mobile DR konfiguráció esetén a MUSICA Acquisition munkaállomást egy laptop számítógépre telepítik.

Az Ultra Mobile DR konfiguráció esetén a MUSICA Acquisition munkaállomást egy táblagép számítógépre telepítik.

A biztonsági előírások, a rendeltetésszerű felhasználás és az általános biztonsági előírások megismeréséhez hivatkozzon a DR detektor felhasználói dokumentációjára.

Nincs extra Wi-Fi hardver - detektor mint hozzáférési pont

DR-detektorok:

- DX-D 40C, DX-D 40G, DX-D 45C, DX-D 45G
- XD 10, XD*10, XD 14, XD*14, XD 17, XD*17
- XF*10, XF*14, XF*17

Csak a Windows 10 esetén.

A munkaállomás a belső Wi-Fi adapterén keresztül kommunikál a detektorral és a vezeték nélküli kórházi hálózattal. A detektor hozzáférési pontként van konfigurálva. Egyszerre csak egy csatlakozás lehet aktív.

A felhasználónak használnia kell a Windows Wi-Fi beállításait a vezeték nélküli DR-detektor és a vezeték nélküli kórházi hálózat közötti váltáshoz



ábra 1: A Windows Wi-Fi beállításai lehetővé teszik a detektor és a kórházi hálózat közötti váltást

- [Váltás a vezeték nélküli DR detektor és a vezeték nélküli kórházi hálózat között](#) oldalszám: 4

Váltás a vezeték nélküli DR detektor és a vezeték nélküli kórházi hálózat között

A MUSICA Acquisition Workstation úgy konfigurálható, hogy csatlakoztatható legyen a vezeték nélküli DR detektorhoz, és a vezeték nélküli kórházi hálózathoz.

Rendszervezrlő egység nélküli vagy a munkaállomáshoz csatlakoztatott vezeték nélküli hozzáférési pont nélküli konfigurációban a DR detektor a MUSICA Acquisition Workstation belső vezeték nélküli adapterén keresztül kommunikál. Egyszerre csak egy csatlakozás lehet aktív. A

felhasználónak manuálisan kell átváltani a vezeték nélküli csatlakozást a kórházi hálózatra vagy a vezeték nélküli csatlakozásra a DR detektorhoz.




Figyelmeztetés: Ha a hálózati kapcsolat megszakadt, a MUSICA Acquisition Workstation egy másik hozzáférési ponthoz csatlakozhat, ha az **Automatikus csatlakozás** engedélyezve van a Windows beállításokban. Ne engedélyezze az **Automatikus csatlakozás** lehetőséget, ha kórházi hálózathoz vagy DR detektorhoz csatlakozik.

Váltás a vezeték nélküli hálózatok között:


1. Húzza az ujját befelé a képernyő jobb oldala felől.

Megjelenik a Windows **Műveletközpont**.

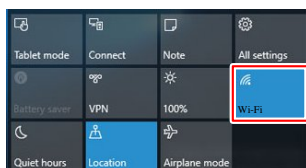

ábra 2: Windows Műveletközpont kiemelt Wifi gombbal

2. Érintse meg a **Wifi** gombot
Megjelennek az elérhető vezeték nélküli hálózatok.
3. Válassza ki a vezeték nélküli hálózatot.

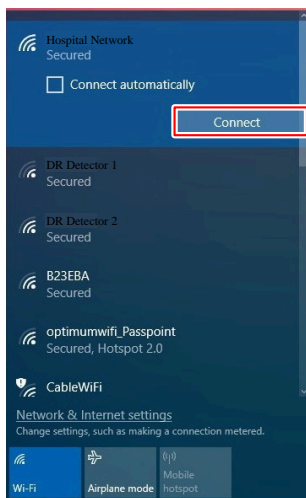

ábra 3: Elérhető vezeték nélküli hálózatok

- A kórházi hálózathoz való csatlakoztatáshoz válassza ki a kórházi hálózat nevét.

A MUSICA Acquisition Workstation, az adatok visszakereséséhez a RIS-ből, illetve a képek nyomtatásához vagy archiválásához, a kórházi hálózathoz van csatlakoztatva.

Nem lehet kommunikálni a DR detektorral, nem végezhető el expozíció.

- A vezeték nélküli DR detektorhoz való csatlakoztatáshoz válassza ki a DR detektor nevét.

Az expozíciók elvégzéséhez a MUSICA Acquisition Workstation csatlakoztatva van a DR detektorhoz.

Nem lehetséges a kommunikáció a kórházi hálózattal, pl. a RIS vagy PACS rendszerrel.

4. Érintse meg a **Csatlakozás** gombot.

A hálózati kapcsolat a kiválasztott vezeték nélküli hálózatra vált.