


Computer portatile/tablet con punto di accesso esterno (Edimax)

Manuale utente

Indice

| | |
|--|----------|
| Note legali..... | 3 |
| Configurazione..... | 3 |
| Punto di accesso collegato alla stazione di lavoro tramite un cavo di rete..... | 4 |

Note legali

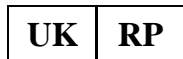

Agfa HealthCare UK Limited, 515 Coldhams Lane, CB1 3JS Cambridge, Cambridge-shire, UK

 Agfa NV - Septestraat 27 - 2640 Mortsels, Belgio

Per ulteriori informazioni sui prodotti Agfa, visitare il sito agfaradiologysolutions.com.

Agfa e il rombo Agfa sono marchi di Agfa-Gevaert N.V., Belgio o delle sue affiliate. NX e MUSICA sono marchi commerciali di Agfa NV Belgio o delle sue affiliate. Tutti gli altri marchi di fabbrica sono proprietà dei rispettivi proprietari e vengono utilizzati a scopo editoriale, senza alcuna intenzione di violarli.

Agfa NV non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, riguardo all'accuratezza, la completezza o l'utilità delle informazioni contenute nel presente manuale e in particolare ricusa ogni garanzia d'idoneità per qualsiasi scopo specifico. Alcuni prodotti e servizi potrebbero non essere disponibili nella propria zona. Contattare il proprio rappresentante per informazioni sulla disponibilità. Agfa NV si impegna a fornire informazioni più accurate possibili, tuttavia non sarà responsabile di eventuali errori tipografici. Agfa NV non sarà in alcun caso ritenuta responsabile per danni derivanti dall'uso o dall'incapacità di usare qualsivoglia informazione, apparecchio, metodo o procedimento indicati in questo manuale. Agfa NV si riserva il diritto di apportare modifiche al presente manuale senza darne preavviso. La versione originale di questo documento è in inglese.

Copyright 2024 Agfa NV

Tutti i diritti riservati.

Pubblicato da Agfa NV

2640 Mortsels, Belgio.

Nessuna parte del presente manuale può essere riprodotta, copiata, adattata o trasmessa in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta di Agfa NV

Configurazione

Le applicazioni Mobile DR e Ultra Mobile DR includono un rivelatore DR wireless e una stazione di lavoro MUSICA Acquisition portatile, e rendono possibile la comunicazione wireless tra il rivelatore e la stazione di lavoro e tra la stazione di lavoro e la rete dell'ospedale.

A seconda della configurazione, è richiesta l'interazione dell'utente per gestire le connessioni della rete.

In una configurazione Mobile DR, la stazione di lavoro MUSICA Acquisition è utilizzata su un computer portatile.

In una configurazione Ultra Mobile DR, la stazione di lavoro MUSICA Acquisition è utilizzata su un tablet PC.

Per indicazioni sulla sicurezza, sull'uso previsto e istruzioni operative generali, fare riferimento alla documentazione dell'utente del rivelatore DR.

Punto di accesso collegato alla stazione di lavoro tramite un cavo di rete

Rivelatori DR:

- DR 10s, DR 14s
- DR 10e, DR 14e, DR 17e
- DX-D 40C, DX-D 40G, DX-D 45C, DX-D 45G
- XD 10, XD*10, XD 14, XD*14, XD 17, XD*17
- XF*10, XF*14, XF*17

La stazione di lavoro comunica con il rivelatore tramite il punto di accesso. La stazione di lavoro comunica con la rete wireless dell'ospedale tramite l'adattatore wifi interno. Entrambe le connessioni sono attive contemporaneamente.

Non è richiesta un'interazione dell'utente per gestire le connessioni della rete.

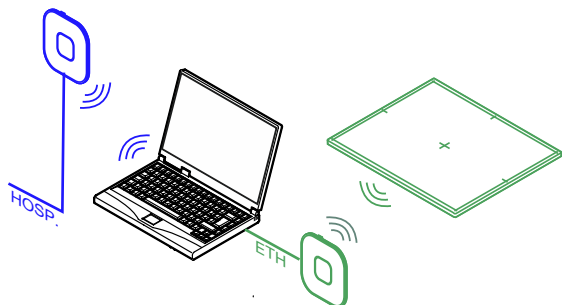


Figura 1: Punto di accesso collegato alla stazione di lavoro tramite un cavo di rete

Esempio di punto di accesso che può essere utilizzato in questa configurazione: Edimax 6288.