


Notebook/tablet com ponto de acesso externo (Edimax)

Manual do usuário

Conteúdo

Aviso Legal.....	3
Configuração.....	3
Ponto de acesso conectado à estação de trabalho através do ca- bo de rede.....	4

Aviso Legal

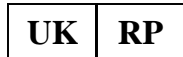

Agfa HealthCare UK Limited, 515 Coldhams Lane, CB1 3JS Cambridge, Cambridgeshire, UK



Agfa NV, 27 de setembro, 2640 Mortsel - Bélgica

Para mais informações sobre produtos Agfa, acesse agfaradiologysolutions.com.

Agfa e o losango Agfa são marcas comerciais da Agfa-Gevaert N.V., Bélgica ou das suas filiais. NX e MUSICA são marcas comerciais da Agfa NV, Bélgica ou de uma das suas filiais. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respetivos titulares e são utilizadas para fins editoriais e sem intenção de infringir a lei.

A Agfa NV não concede qualquer garantia ou representação, expressa ou implícita, relativamente à precisão, integridade ou utilidade da informação contida neste documento e renuncia especificamente garantias de adaptabilidade a qualquer fim particular. Produtos e serviços podem não estar disponíveis para sua área local. Fale com seu representante de vendas para obter informações sobre a disponibilidade. A Agfa NV esforça-se diligentemente em fornecer informações o mais precisas possível, mas não se responsabiliza por erros tipográficos. A Agfa NV não será, em qualquer circunstância, responsável por qualquer dano causado pela utilização ou impossibilidade de utilização de qualquer informação, aparelho, método ou processo descritos neste documento. A Agfa NV reserva-se o direito de efetuar alterações neste documento sem aviso prévio. A versão original deste documento está em inglês.

Copyright 2024 Agfa NV

Todos os direitos reservados.

Publicado pela Agfa NV

2640 Mortsel - Bélgica.

Nenhuma parte deste documento poderá ser reproduzida, copiada, adaptada ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio sem a autorização por escrito da Agfa NV

Configuração

As aplicações DR Móvel e DR Ultra Móvel contêm um detector de DR sem fios e uma estação de trabalho MUSICA Acquisition notebook, e fornecem uma conexão sem fios entre o detector e a estação de trabalho, e entre a estação de trabalho e a rede hospitalar.

Dependendo da configuração, poderá ser necessária a interação do usuário para gerenciar as conexões de rede.

Em uma configuração de DR Móvel, a estação de trabalho MUSICA Acquisition é executada em um notebook.

Em uma configuração de DR Ultra Móvel, a estação de trabalho MUSICA Acquisition é executada em um Tablet.

Consulte a documentação do usuário do detector de DR para as instruções de segurança, a utilização pretendida e as instruções gerais de funcionamento.

Ponto de acesso conectado à estação de trabalho através do cabo de rede

Detectores de DR:

- DR 10s, DR 14s
- RD 10e, RD 14e, RD 17e
- DX-D 40C, DX-D 40G, DX-D 45C, DX-D 45G
- XD10, XD*10, XD14, XD*14, XD17, XD*17
- XF*10, XF*14, XF*17

A estação de trabalho se comunica com o detector através do ponto de acesso. A estação de trabalho se comunica com a rede hospitalar sem fios através do adaptador de Wi-Fi interno. Ambas as conexões ficam ativas em simultâneo.

Não é necessária nenhuma interação do usuário para gerenciar as conexões de rede.

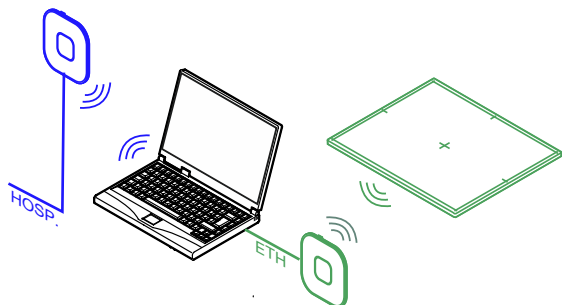


Figura 1: Ponto de acesso conectado à estação de trabalho através do cabo de rede

Exemplo do ponto de acesso que pode ser usado nesta configuração: Edimax 6288.