


Prijenosno računalo / tablet s vanjskom pristupnom točkom (Edimax)

Priručnik za korisnika

Sadržaj

Pravna napomena.....	3
Konfiguracija.....	3
Pristupna točka povezana s radnom stanicom putem mrežnog kabela.....	4

Pravna napomena

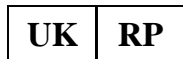

Agfa HealthCare UK Limited, 515 Coldhams Lane, CB1 3JS Cambridge, Cambridge-shire, UK

 Agfa NV, Septestraat 27, 2640 Mortsel - Belgija

Više informacija o Agfa proizvodima potražite na agfaradiologysolutions.com.

Agfa i Agfa romb zaštitni su znakovi tvrtke Agfa-Gevaert N.V., Belgija ili njezinih partnera. NX i MUSICA zaštitni su znakovi tvrtke Agfa NV, Belgija ili nekog od njezinih partnera. Sve ostale zaštitne znakove posjeduju njihovi vlasnici i upotrebljavaju se u svrhe ovog izdanja, bez ikakve namjere kršenja njihovih prava.

Agfa NV ne daje nikakva jamstva ili izjave, izričite ili implicitne, u pogledu točnosti, cjelovitosti ili korisnosti informacija sadržanih u ovom dokumentu i posebno odriče jamstva prikladnosti za bilo koju određenu svrhu. Proizvodi i usluge možda neće biti dostupni za vaše lokalno područje. Za informacije o dostupnosti, kontaktirajte lokalnog zastupnika. Agfa NV marljivo nastoji pružiti što je moguće točnije informacije, ali ne snosi odgovornost za tipografske pogreške. Agfa NV neće ni pod kojim uvjetima biti odgovorna za štete nastale uporabom ili nemogućnošću uporabe bilo kojih informacija, uređaja, metode ili postupka opisanih u ovom dokumentu. Agfa NV zadržava pravo izmjena ovog dokumenta bez prethodne najave. Izvorna verzija ovog dokumenta je na engleskom jeziku.

Autorska prava 2024. Agfa NV

Sva prava pridržana.

Objavio Agfa NV

2640 Mortsel - Belgija.

Nijedan dio ovog dokumenta ne smije se reproducirati, kopirati, prilagođavati ili prenositi u bilo kojem obliku ili putem bilo kojeg medija bez pisanog dopuštenja tvrtke Agfa NV

Konfiguracija

Mobile DR i Ultra Mobile DR aplikacije sadrže bežični DR detektor i prijenosnu MUSICA Acquisition radnu stanicu i osiguravaju bežičnu vezu između detektora i radne stanice i između radne stanice i bolničke mreže.

Ovisno o konfiguraciji potrebna je aktivnost korisnika za upravljanje mrežnim vezama.

U Mobile DR konfiguraciji MUSICA Acquisition radna stanica implementirana je na laptop PC-ju.

U Ultra Mobile DR konfiguraciji MUSICA Acquisition radna stanica implementirana je na tablet PC-ju.

Pogledajte korisničku dokumentaciju DR detektora za smjernice o sigurnosti, namjeni i općim uputama za uporabu.


Pristupna točka povezana s radnom stanicom putem mrežnog kabela

DR detektori:

- DR 10s, DR 14s
- DR 10e, DR 14e, DR 17e
- DX-D 40C, DX-D 40G, DX-D 45C, DX-D 45G
- XD 10, XD*10, XD 14, XD*14, XD 17, XD*17
- XF*10, XF*14, XF*17

Radna stanica komunicira s detektorom putem pristupne točke. Radna stanica komunicira s bežičnom bolničkom mrežom putem unutarnjeg Wi-Fi adaptera. Obje veze su istodobno aktivne.

Za upravljanje mrežnim vezama nije potrebna nikakva aktivnost korisnika.

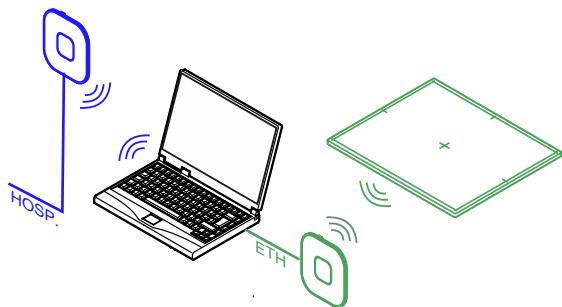

Slika 1: Pristupna točka povezana s radnom stanicom putem mrežnog kabela

Primjer pristupne točke koja se može koristiti u ovoj konfiguraciji: Edimax 6288.