

CP-BU NEW

PELÍCULA

Película radiográfica sensible al azul destinada a aplicaciones de radiología. General película universal con una calidad de imagen elevada y estable gracias a la tecnología disc grain de Agfa.

- Miembro de la familia CP de películas Agfa
- Película sensible al azul de gran sensibilidad y contraste medio alto
- Apta para una completa variedad de aplicaciones

La CP-BU NEW es una película radiográfica de alta sensibilidad, de contraste medio a alto y sensible al azul. Esta concebida para la utilización en aplicaciones radiográficas generales con pantallas de refuerzo de tierras raras y de tungstato de calcio que emiten en el sector azul.

Concebida para una amplia gama de aplicaciones

La película CP-BU NEW se puede considerar como universal, debido a la concepción de la curva característica. Por un lado, el contraste en la sección

del medio y en el hombro de la curva es suficiente para asegurar una visualización excelente de todos los detalles de importancia, para aplicaciones tales como la angiografía y la radiografía de la estructura ósea. Todo las estructuras en el área de los pulmones se representan igualmente con toda nitidez.

Por otro lado, el pie de la curva se ha estudiado de tal manera que la información en las áreas de menor densidad tales como las retrocardial, mediastinal y vertebral se visualizan también de manera muy satisfactoria.





Siempre imágenes estables

La película CP-BU NEW se caracteriza por su excelente estabilidad: la tecnología Disc Grain de Agfa mantiene una calidad estable y elevada de la imagen, incluso cuando el procesamiento de la película se efectúa con productos químicos más diluidos o en circunstancias desfavorables. La película CP-BU NEW es también poco sensible a las huellas de desensibilización.

Fácil de leer, un aspecto neutro agradable

Con la utilización de una base de poliéster azul, las imágenes adquieren un aspecto neutro agradable que facilita la lectura y la hace más placentera.

Familia CP de películas Agfa

La familia CP de películas Agfa le permite seleccionar la película que mejor se ajusta a sus exigencias específicas.

- CP-BU NEW film - película universal sensible al azul
- CP-BU M film - película universal sensible al azul
- Ortho CP-G Plus film - película universal sensible al verde
- Ortho CP-GU film - película universal sensible al verde
- Ortho CP-GU M film - película universal sensible al verde

Además, se dispone de pantallas concebidas especialmente para estas películas.

Características técnicas

GENERALIDADES

Requisitos de luz de seguridad

- Se recomienda usar un filtro especial rojo para luz de seguridad, que ha de emplearse conjuntamente con una bombilla opaca de 15 watt y colocarse al menos a 1,2 m de la zona de carga/descarga y de la bandeja del revelador

Tratamiento

- La película CP-BU NEW se ha concebido para los tratamientos RP, ampliado y manual
- Se recomienda emplear las soluciones de revelado y fijado Agfa

Manipulación

- La película se debe manipular con cuidado
- Evite arrugar, doblar o ejercer cualquier presión física sobre la película

Conservación

- Las películas sin abrir y vírgenes deben guardarse a una temperatura entre 4 y 25° C en un lugar seco
- Además, la película se tiene que proteger de la radiación ionizante


Embalaje

- La película CP-BU NEW está disponible en todos los formatos acostumbrados en embalajes de 100 hojas
- A pedido se pueden suministrar otros embalajes y formatos

CURVA


Curva sensitométrica

- Revelador ampliamente probado de primera clase, en un sistema RP

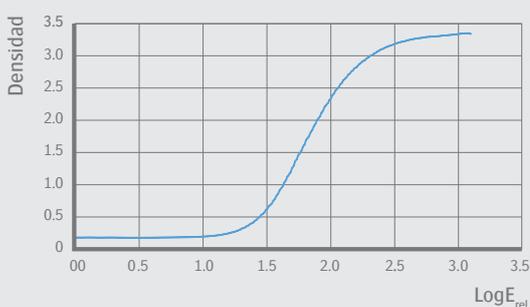

Curva sensibilidad espectral

- Sensibilidad en función de la energía necesaria para alcanzar una sensibilidad 1 sobre el velo

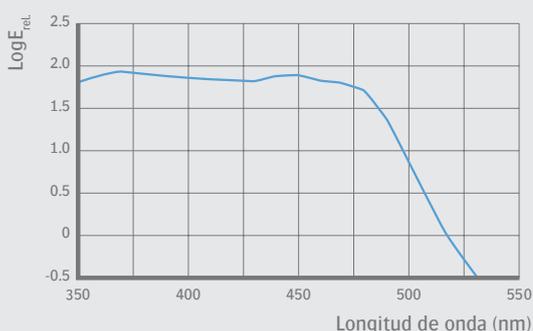

Este símbolo usado en la etiqueta del embalaje significa: abrir únicamente en el cuarto oscuro

Para más información, pónganse en contacto con su representante local de ventas de Agfa.

CP-BU NEW

Para más información sobre Agfa, visite nuestra web: www.agfa.com ■

Agfa y el rombo de Agfa son marcas registradas de Agfa-Gevaert NV, Bélgica, o de sus filiales. Reservados todos los derechos. Toda la información incluida se entiende a modo de guía y las características de los productos y servicios descritos en esta publicación pueden cambiar en cualquier momento, sin previo aviso. Es probable que no todos los productos y servicios mencionados estén disponibles en su región. Por favor, diríjase a su representante local de ventas para obtener más información sobre la disponibilidad. Agfa-Gevaert NV se esfuerza con ahínco en promocionar una información lo más precisa posible, pero no se hace responsable de los posibles errores tipográficos.

© 2019 Agfa NV
Reservados todos los derechos
Publicado por Agfa NV
Septestraat 27 - 2640 Mortsel
Bélgica

5RQYF ES 00201902

