

Rešetke protiv raspršivanja za DR sustave

Priručnik za korisnika

Sadržaj

Opseg ovog priručnika.....	4
Antiraspršna rešetka.....	5
Sigurnosne smjernice.....	5
Orijentacija linija rešetki.....	6
DR 14e DR detektor.....	6
DR 14s DR detektor.....	6
DR 14e DR detektor.....	8
DR 14s DR detektor.....	9
DR 14e DR detektor.....	9
DX-D 10C, DX-D 10G DR detektor.....	10
DX-D 40C, DX-D 40G DR detektor.....	11
DX-D 20C, DX-D 20G DR detektor.....	11
DR detektor DX-D 30C.....	12
DX-D 35C DR detektor.....	12
XD 14, XD*14 i XF*14 DR detektor.....	13
DR detektor XD 17, XD*17 i XF*17.....	14
Sustav DR 400 ili DR 600.....	15
Uvjeti okoline za rešetke protiv raspršivanja.....	16

DR 800 sustav.....	17
DX-D 300 sustav.....	18
DX-D 400 sustav.....	19
DX-D 600 sustav.....	20
Sustav Valory.....	21
DR Retrofit sustav.....	22

Opseg ovog priručnika

Ovaj priručnik sadrži informacije za sigurnu i učinkovitu uporabu rešetki protiv raspršivanja na DR sustavima.

Rešetke protiv rasipanja zračenja upotrebljavaju se za smanjivanje raspršenog zračenja i poboljšanje kvalitete snimke. Rešetke su dostupne kao opcija.


Antiraspršna rešetka


Rešetke protiv rasipanja zračenja upotrebljavaju se za smanjivanje raspršenog zračenja i poboljšanje kvalitete snimke. Rešetke su dostupne kao opcija.


Za DR detektore koriste se fokusirane rešetke. Fokusirane rešetke zahtijevaju centriranje rendgenskog izvora na detektor i određeni raspon udaljenosti između izvora rendgenskog zračenja i detektora. Boja ručke rešetke označava za koju se udaljenost rešetka koristi.

Za zamjenu rešetke u rendgenskom stolu ili rendgenskom zidnom stativu:

1. Izvucite rešetku pomoću ručke.
2. Pohranite rešetku na sigurno mjesto kako biste izbjegli oštećenje.
3. Umetnite rešetku u odgovarajući prorez buckyja tako da oznake budu okrenute prema gore. Provjerite je li rešetka ugurana do kraja.


 **Upozorenje:** Pažljivo rukujte rešetkama protiv raspršivanja i pohranite ih na sigurno mjesto kada nisu u upotrebi. Ako padne na pod, rešetka se može oštetiti i stvoriti vidljive artefakte na snimci ili smanjiti kvalitetu snimke.


 **Opres:** Upotreba fokusirane rešetke protiv raspršivanja s izvorom rendgenskog zračenja koje nije centriran ili je na pogrešnoj udaljenosti može prouzročiti smanjenu kvalitetu snimke.

 **Opres:** Ako nije pravilno umetnuta u bucky, rešetka protiv raspršivanja može prouzročiti ozljedu pacijenta ili oštećenje opreme.

- [Sigurnosne smjernice](#) na stranici 5


Sigurnosne smjernice

 **Upozorenje:** Prilikom umetanja rešetki protiv raspršivanja, važno je da rešetka odgovara predviđenoj udaljenosti izvor-snimka (source-image-distance, SID) na koju je rešetka fokusirana. Zbog fokusiranja rešetki, jedinica glave cijevi mora biti centrirana na bucky rešetku.

 **Upozorenje:** Oštećena rešetka. Smanjena kvaliteta snimke. Rešetkama rukujte izuzetno pažljivo.

Orijentacija linija rešetki

Orijentacija linija rešetki protiv rasipanja na klik označena je središnjom linijom.

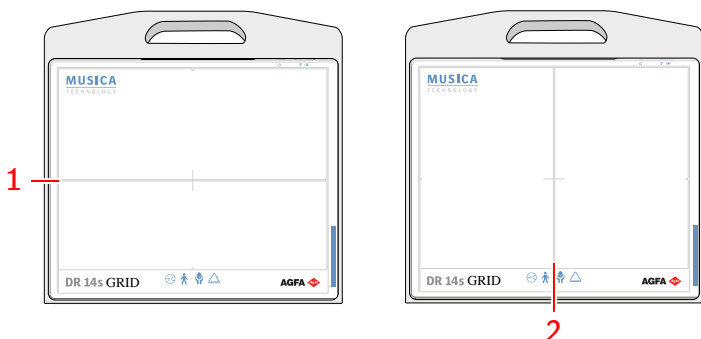

1. Linije rešetki nalaze se na duljoj stranici rešetke.
2. Linije rešetki nalaze se na kraćoj stranici rešetke.

Slika 1: Orijentacija linija rešetki

DR 14e DR detektor

DR detektor podržava uporabu sljedećih rešetki na klik raspoloživih u Agfa asortimanu proizvoda:

- 100 cm - 180 cm (40 inča - 72 inča), 85 linija/cm (215 linija/inču), 6:1, Pb/Al

DR detektor podržava uporabu rešetki koje su dio rendgenskog sustava. Pogledajte poglavlja u nastavku ovog dokumenta.

Srodne informacije

[Sustav DR 400 ili DR 600](#) na stranici 15

[DX-D 300 sustav](#) na stranici 18

[DX-D 600 sustav](#) na stranici 20

[Sustav Valory](#) na stranici 21

[DR Retrofit sustav](#) na stranici 22

DR 14s DR detektor

DR detektor podržava uporabu sljedećih rešetki na klik raspoloživih u Agfa asortimanu proizvoda:

- 100 cm - 180 cm (40 inča - 72 inča), 85 linija/cm (215 linija/inču), 6:1, Pb/Al

DR detektor podržava uporabu rešetki koje su dio rendgenskog sustava. Pogledajte poglavlja u nastavku ovog dokumenta.

Srodne informacije

[Sustav DR 400 ili DR 600](#) na stranici 15

[DR 800 sustav](#) na stranici 17

[DX-D 300 sustav](#) na stranici 18

[DX-D 400 sustav](#) na stranici 19

[DX-D 600 sustav](#) na stranici 20

[Sustav Valory](#) na stranici 21

[DR Retrofit sustav](#) na stranici 22

DR 14e DR detektor

DR detektor podržava uporabu sljedećih rešetki na klik raspoloživih u Agfa asortimanu proizvoda:

- 100 cm - 180 cm (40 inča - 72 inča), 85 linija/cm (215 linija/inču), 6:1, Pb/Al
- 100 cm - 180 cm (40 inča - 72 inča), 85 linija/cm (215 linija/inču), 6:1, Pb/Al, SD (linije rešetke usmjerene prema kraćoj stranici rešetke)
- 100 cm - 180 cm (40 inča - 72 inča), 85 linija/cm (215 linija/inču), 10:1, Pb/Al

DR detektor podržava uporabu rešetki koje su dio rendgenskog sustava. Pogledajte poglavlja u nastavku ovog dokumenta.

Srodne informacije

[Sustav DR 400 ili DR 600](#) na stranici 15

[DX-D 300 sustav](#) na stranici 18

[DX-D 600 sustav](#) na stranici 20

[Sustav Valory](#) na stranici 21

[DR Retrofit sustav](#) na stranici 22

DR 14s DR detektor

DR detektor podržava uporabu sljedećih rešetki na klik raspoloživih u Agfa asortimanu proizvoda:

- 100 cm - 180 cm (40 inča - 72 inča), 85 linija/cm (215 linija/inču), 6:1, Pb/Al
- 100 cm - 180 cm (40 inča - 72 inča), 85 linija/cm (215 linija/inču), 6:1, Pb/Al, SD (linije rešetke usmjerene prema kraćoj stranici rešetke)
- 100 cm - 180 cm (40 inča - 72 inča), 85 linija/cm (215 linija/inču), 10:1, Pb/Al

DR detektor podržava uporabu rešetki koje su dio rendgenskog sustava. Pogledajte poglavlja u nastavku ovog dokumenta.

Srodne informacije

[Sustav DR 400 ili DR 600](#) na stranici 15

[DR 800 sustav](#) na stranici 17

[DX-D 300 sustav](#) na stranici 18

[DX-D 400 sustav](#) na stranici 19

[DX-D 600 sustav](#) na stranici 20

[Sustav Valory](#) na stranici 21

[DR Retrofit sustav](#) na stranici 22

DR 14e DR detektor

DR detektor podržava uporabu sljedećih rešetki na klik raspoloživih u Agfa asortimanu proizvoda:

- 100 cm - 180 cm (40 inča - 72 inča), 85 linija/cm (215 linija/inču), 6:1, Pb/Al
- 100 cm - 180 cm (40 inča - 72 inča), 85 linija/cm (215 linija/inču), 10:1, Pb/Al

DR detektor podržava uporabu rešetki koje su dio rendgenskog sustava. Pogledajte poglavlja u nastavku ovog dokumenta.

Srodne informacije

[Sustav DR 400 ili DR 600](#) na stranici 15

[DX-D 300 sustav](#) na stranici 18

[DX-D 600 sustav](#) na stranici 20

[Sustav Valory](#) na stranici 21

[DR Retrofit sustav](#) na stranici 22

DX-D 10C, DX-D 10G DR detektor

DR detektor podržava uporabu sljedećih rešetki na klik raspoloživih u Agfa asortimanu proizvoda:

- 100 cm - 180 cm (40 inča - 72 inča), 85 linija/cm (215 linija/inču), 6:1, aluminijski poklopac
- 100 cm - 180 cm (40 inča - 72 inča), 85 linija/cm (215 linija/inču), 10:1, aluminijski poklopac

DR detektor podržava uporabu rešetki koje su dio rendgenskog sustava. Pogledajte poglavlja u nastavku ovog dokumenta.

Srodne informacije

[Sustav DR 400 ili DR 600](#) na stranici 15

[DX-D 400 sustav](#) na stranici 19

[DX-D 600 sustav](#) na stranici 20

[DR Retrofit sustav](#) na stranici 22

DX-D 40C, DX-D 40G DR detektor

DR detektor podržava uporabu sljedećih rešetki na klik raspoloživih u Agfa asortimanu proizvoda:

- 100 cm - 180 cm (40 inča - 72 inča), 85 linija/cm (215 linija/inču), 6:1, Pb/Al
- 100 cm - 180 cm (40 inča - 72 inča), 85 linija/cm (215 linija/inču), 6:1, Pb/Al, SD (linije rešetke usmjerene prema kraćoj stranici rešetke)
- 100 cm - 180 cm (40 inča - 72 inča), 85 linija/cm (215 linija/inču), 10:1, Pb/Al

DR detektor podržava uporabu rešetki koje su dio rendgenskog sustava. Pogledajte poglavlja u nastavku ovog dokumenta.

Srodne informacije

[Sustav DR 400 ili DR 600](#) na stranici 15

[DX-D 300 sustav](#) na stranici 18

[DX-D 400 sustav](#) na stranici 19

[DX-D 600 sustav](#) na stranici 20

[Sustav Valory](#) na stranici 21

[DR Retrofit sustav](#) na stranici 22

DX-D 20C, DX-D 20G DR detektor

DR detektor podržava uporabu sljedećih rešetki na klik raspoloživih u Agfa asortimanu proizvoda:

- 100 cm - 180 cm (40 inča - 72 inča), 85 linija/cm (215 linija/inču), 6:1, aluminijski poklopac
- 100 cm - 180 cm (40 inča - 72 inča), 85 linija/cm (215 linija/inču), 10:1, aluminijski poklopac

DR detektor podržava uporabu rešetki koje su dio rendgenskog sustava. Pogledajte poglavlja u nastavku ovog dokumenta.

Srodne informacije

[DX-D 600 sustav](#) na stranici 20

[DR Retrofit sustav](#) na stranici 22

DR detektor DX-D 30C

DR detektor podržava uporabu sljedećih rešetki na klik raspoloživih u Agfa asortimanu proizvoda:

- 100 cm - 180 cm (40 inča - 72 inča), 52 linije/cm (132 linije/inču), 6:1, aluminijski poklopac
- 100 cm - 180 cm (40 inča - 72 inča), 52 linije/cm (132 linije/inču), 6:1, aluminijski poklopac, linije rešetke usmjerene prema kraćoj stranici
- 100 cm - 180 cm (40 inča - 72 inča), 52 linije/cm (132 linije/inču), 10:1, aluminijski poklopac

DR detektor podržava uporabu rešetki koje su dio rendgenskog sustava. Pogledajte poglavlja u nastavku ovog dokumenta.

Srodne informacije

[Sustav DR 400 ili DR 600](#) na stranici 15

[DX-D 300 sustav](#) na stranici 18

[DX-D 400 sustav](#) na stranici 19

[DX-D 600 sustav](#) na stranici 20

DX-D 35C DR detektor

DR detektor podržava uporabu sljedećih rešetki na klik raspoloživih u Agfa asortimanu proizvoda:

- 100 cm - 180 cm (40 inča - 72 inča), 52 linije/cm (132 linije/inču), 6:1, aluminijski poklopac
- 100 cm - 180 cm (40 inča - 72 inča), 52 linije/cm (132 linije/inču), 10:1, aluminijski poklopac

DR detektor podržava uporabu rešetki koje su dio rendgenskog sustava. Pogledajte poglavlja u nastavku ovog dokumenta.

Srodne informacije

[Sustav DR 400 ili DR 600](#) na stranici 15

[DX-D 300 sustav](#) na stranici 18

[DX-D 400 sustav](#) na stranici 19

[DX-D 600 sustav](#) na stranici 20

XD 14, XD*14 i XF*14 DR detektor

DR detektor podržava uporabu sljedećih rešetki na klik raspoloživih u Agfa asortimanu proizvoda:

- 100 cm - 180 cm (40 inča - 72 inča), 52 linije/cm (132 linije/inču), 6:1, aluminijski poklopac
- 100 cm - 180 cm (40 inča - 72 inča), 52 linije/cm (132 linije/inču), 6:1, aluminijski poklopac, linije rešetke usmjerene prema kraćoj stranici
- 100 cm - 180 cm (40 inča - 72 inča), 52 linije/cm (132 linije/inču), 10:1, aluminijski poklopac

DR detektor podržava uporabu rešetki koje su dio rendgenskog sustava. Pogledajte poglavlja u nastavku ovog dokumenta.



Napomena DR detektor XD 14 ne podržava uporabu rešetki s 85 linija/cm (215 linija/inču). DR detektori XD*14 i XF*14 podržavaju te rešetke.

Srodne informacije

[Sustav DR 400 ili DR 600](#) na stranici 15

[DR 800 sustav](#) na stranici 17

[DX-D 300 sustav](#) na stranici 18

[DX-D 400 sustav](#) na stranici 19

[DX-D 600 sustav](#) na stranici 20

[DR Retrofit sustav](#) na stranici 22

[Sustav Valory](#) na stranici 21

DR detektor XD 17, XD*17 i XF*17

DR detektor podržava uporabu sljedećih rešetki na klik raspoloživih u Agfa asortimanu proizvoda:

- 100 cm - 180 cm (40 inča - 72 inča), 52 linije/cm (132 linije/inču), 6:1, aluminijski poklopac
- 100 cm - 180 cm (40 inča - 72 inča), 52 linije/cm (132 linije/inču), 10:1, aluminijski poklopac

DR detektor podržava uporabu rešetki koje su dio rendgenskog sustava. Pogledajte poglavlja u nastavku ovog dokumenta.



Napomena DR detektor XD 17 ne podržava uporabu rešetki s 85 linija/cm (215 linija/inču). DR detektori XD*17 i XF*17 podržavaju te rešetke.

Srodne informacije

[Sustav DR 400 ili DR 600](#) na stranici 15

[DR 800 sustav](#) na stranici 17

[DX-D 300 sustav](#) na stranici 18

[DX-D 400 sustav](#) na stranici 19

[DX-D 600 sustav](#) na stranici 20

[DR Retrofit sustav](#) na stranici 22

[Sustav Valory](#) na stranici 21

Sustav DR 400 ili DR 600

Sustav podržava uporabu sljedećih zamjenjivih rešetki raspoloživih u Agfa asortimanu proizvoda:

- 100 cm (39 inča), 52 linija/cm (132 linija/inču), 10:1, aluminijski međuprostor, poklopac od ugljičnih vlakana
- 140 cm (55 inča), 52 linija/cm (132 linija/inču), 10:1, aluminijski međuprostor, poklopac od ugljičnih vlakana
- 150 cm (59 inča), 52 linija/cm (132 linija/inču), 10:1, aluminijski međuprostor, poklopac od ugljičnih vlakana
- 180 cm (71 inč), 52 linija/cm (132 linija/inču), 10:1, aluminijski međuprostor, poklopac od ugljičnih vlakana

Sustav podržava i uporabu sljedećih zamjenjivih rešetki (nisu dio standardnog asortimana) raspoloživih u Agfa asortimanu proizvoda, ne vrijedi za detektore XD 14 i XD 17 DR:

- 100 cm (39 inča), 85 linija/cm (215 linija/inču), 10:1, aluminijski međuprostor, poklopac od ugljičnih vlakana
- 150 cm (59 inča), 85 linija/cm (215 linija/inču), 10:1, aluminijski međuprostor, poklopac od ugljičnih vlakana
- 180 cm (71 inč), 85 linija/cm (215 linija/inču), 10:1, aluminijski međuprostor, poklopac od ugljičnih vlakana

Rešetka	
Proizvođač	JPI Healthcare Co. Ltd 608-ho, 28, Digital-ro 33 gil, Guro-gu, Seoul, 08377, Koreja
Tip	
100 cm	5523/XXX
140 cm	5523/XXX
150 cm	5523/XXX
180 cm	5523/XXX
Dimenzije	
Dimenzija	480 mm x 455 mm (Š x D)
Smjer linija rešetke	Paralelne sa stranom 455 mm
Težina	1,6 kg

- [Uvjeti okoline za rešetke protiv raspršivanja](#) na stranici 16

Srodne informacije

[DR 14e DR detektor](#) na stranici 6

[DR 14s DR detektor](#) na stranici 6

[DR 14e DR detektor](#) na stranici 8

[DR 14s DR detektor](#) na stranici 9

[DR 14e DR detektor](#) na stranici 9

[DX-D 10C, DX-D 10G DR detektor](#) na stranici 10

[DX-D 40C, DX-D 40G DR detektor](#) na stranici 11

[DR detektor DX-D 30C](#) na stranici 12

[DX-D 35C DR detektor](#) na stranici 12

[XD 14, XD*14 i XF*14 DR detektor](#) na stranici 13

[DR detektor XD 17, XD*17 i XF*17](#) na stranici 14

Uvjeti okoline za rešetke protiv raspršivanja

Okolišni uvjeti (tijekom skladištenja i transporta)	
Temperatura (okoline)	između -10° i 60° Celzija
Vlažnost (bez kondenzacije)	između 10 i 90% relativne vlažnosti
Okolišni uvjeti (tijekom normalnog rada)	
Temperatura (okoline)	između 0° i 40° Celzija
Vlažnost (bez kondenzacije)	između 20 i 70 % relativne vlažnosti

DR 800 sustav

Sustav podržava korištenje sljedećih statičkih rešetki za radiografski stol, dostupnih u asortimanu tvrtke Agfa:

- 120 cm (47 inča), 85 linija/cm (215 linija/inču), 12:1
- 180 cm (72 inč), 85 linija/cm (215 linija/inču), 12:1

Sustav podržava korištenje sljedećih pokretnih, neizmjenjivih rešetki za rendgenski zidni stativ raspoloživih u Agfa asortimanu proizvoda:

- 180 cm (72 inča), 35 linija/cm (90 linija/inču), 12:1
- 180 cm (72 inča), 80 linija/cm (200 linija/inču), 12:1

Srodne informacije

[DR 14s DR detektor](#) na stranici 6

[DR 14s DR detektor](#) na stranici 9

[XD 14, XD*14 i XF*14 DR detektor](#) na stranici 13

[DR detektor XD 17, XD*17 i XF*17](#) na stranici 14

DX-D 300 sustav

DR detektor podržava uporabu sljedećih izmjenjivih rešetki raspoloživih u Agfa asortimanu proizvoda:

- 100 cm (39 inča), 51 linija/cm (130 linija/inču), 8:1, ugljična vlakna
- 180 cm (71 inč), 51 linija/cm (130 linija/inču), 8:1, ugljična vlakna

Sustav podržava uporabu sljedećih izmjenjivih rešetki raspoloživih u Agfa asortimanu proizvoda koje su dopuštene samo za uporabu s DR detektorima DR 10s, DR 14s, XD*14 i XD*17 te u sustavima s fiksnim DR detektorom Pixium RAD 4343:

- 100 cm (39 inča), 85 linija/cm (215 linija/inču), 12:1, ugljična vlakna
- 180 cm (71 inč), 85 linija/cm (215 linija/inču), 12:1, ugljična vlakna

Srodne informacije

[DR 14s DR detektor](#) na stranici 6

[DR 14s DR detektor](#) na stranici 9

[DR detektor DX-D 30C](#) na stranici 12

[DX-D 35C DR detektor](#) na stranici 12

[DX-D 40C, DX-D 40G DR detektor](#) na stranici 11

[DR 14e DR detektor](#) na stranici 6

[DR 14e DR detektor](#) na stranici 8

[DR 14e DR detektor](#) na stranici 9

[XD 14, XD*14 i XF*14 DR detektor](#) na stranici 13

[DR detektor XD 17, XD*17 i XF*17](#) na stranici 14

DX-D 400 sustav

DR detektor podržava uporabu sljedećih pomičnih neizmjenjivih rešetki raspoloživih u Agfa asortimanu proizvoda:

- 100 cm (39 inča), 52 linije/cm (132 linije/inču), 10:1, ugljična vlakna
- 150 cm (59 inča), 52 linije/cm (132 linije/inču), 10:1, ugljična vlakna
- 180 cm (71 inč), 52 linije/cm (132 linije/inču), 10:1, ugljična vlakna

Sustav podržava uporabu sljedećih pomičnih, neizmjenjivih rešetki raspoloživih u Agfa asortimanu proizvoda koje su dopuštene za uporabu sa svim DR detektorima osim DR 10s, DR 14s, DX-D 60C i DX-D 60G:

- 100 cm (39 inča), 85 linija/cm (215 linija/inču), 12:1, ugljična vlakna
- 150 cm (59 inča), 85 linija/cm (215 linija/inču), 8:1, ugljična vlakna
- 180 cm (71 inč), 85 linija/cm (215 linija/inču), 12:1, ugljična vlakna

Sustav podržava upotrebu sljedećih izmjenjivih rešetki, raspoloživih u Agfa asortimanu za upotrebu samo s DR 10s, DR 14s, XD*14 i XD*17 DR detektorima:

- 100 cm (39 inča), 85 linija/cm (215 linija/inču), 12:1, ugljična vlakna
- 150 cm (59 inča), 85 linija/cm (215 linija/inču), 12:1, ugljična vlakna
- 180 cm (71 inč), 85 linija/cm (215 linija/inču), 12:1, ugljična vlakna

Srodne informacije

[DX-D 10C, DX-D 10G DR detektor](#) na stranici 10

[DR 14s DR detektor](#) na stranici 6

[DR 14s DR detektor](#) na stranici 9

[DR detektor DX-D 30C](#) na stranici 12

[DX-D 35C DR detektor](#) na stranici 12

[DX-D 40C, DX-D 40G DR detektor](#) na stranici 11

[XD 14, XD*14 i XF*14 DR detektor](#) na stranici 13

[DR detektor XD 17, XD*17 i XF*17](#) na stranici 14

DX-D 600 sustav

DR detektor podržava uporabu sljedećih izmjenjivih rešetki raspoloživih u Agfa asortimanu proizvoda:

- 100 cm (39 inča), 52 linije/cm (132 linije/inču), 10:1, ugljična vlakna
- 150 cm (59 inča), 52 linije/cm (132 linije/inču), 10:1, ugljična vlakna
- 180 cm (71 inč), 52 linije/cm (132 linije/inču), 10:1, ugljična vlakna

Sustav podržava uporabu sljedećih izmjenjivih rešetki raspoloživih u Agfa asortimanu proizvoda koje su dopuštene samo za uporabu s DR detektorima DR 10s, DR 14s, XD*14 i XD*17 te u sustavima s fiksnim DR detektorom Pixium RAD 4343:

- 100 cm (39 inča), 85 linija/cm (215 linija/inču), 12:1, ugljična vlakna
- 150 cm (51 inč), 85 linija/cm (215 linija/inču), 12:1, ugljična vlakna
- 180 cm (71 inč), 85 linija/cm (215 linija/inču), 12:1, ugljična vlakna

Srodne informacije

[DX-D 10C, DX-D 10G DR detektor](#) na stranici 10

[DX-D 20C, DX-D 20G DR detektor](#) na stranici 11

[DR 14s DR detektor](#) na stranici 6

[DR 14s DR detektor](#) na stranici 9

[DR detektor DX-D 30C](#) na stranici 12

[DX-D 35C DR detektor](#) na stranici 12

[DX-D 40C, DX-D 40G DR detektor](#) na stranici 11

[DR 14e DR detektor](#) na stranici 6

[DR 14e DR detektor](#) na stranici 8

[DR 14e DR detektor](#) na stranici 9

[XD 14, XD*14 i XF*14 DR detektor](#) na stranici 13

[DR detektor XD 17, XD*17 i XF*17](#) na stranici 14

Sustav Valory

Sustav podržava uporabu sljedećih zamjenjivih rešetki raspoloživih u Agfa asortimanu proizvoda:

- 100 cm (39 inča), 52 linije/cm (132 linije/inču), 10:1, aluminijski međuprostor, poklopac od ugljičnih vlakana (kôd za narudžbu 56F97)
- 140 cm (55 inča), 52 linije/cm (132 linije/inču), 10:1, aluminijski međuprostor, poklopac od ugljičnih vlakana (kôd za narudžbu MBV63)
- 150 cm (59 inča), 52 linije/cm (132 linije/inču), 10:1, aluminijski međuprostor, poklopac od ugljičnih vlakana (kôd za narudžbu 56GAC)
- 180 cm (71 inč), 52 linije/cm (132 linije/inču), 10:1, aluminijski međuprostor, poklopac od ugljičnih vlakana (kôd za narudžbu 56GBE)

Srodne informacije

[DR 14e DR detektor](#) na stranici 6

[DR 14s DR detektor](#) na stranici 6

[DR 14e DR detektor](#) na stranici 8

[DR 14s DR detektor](#) na stranici 9

[DR 14e DR detektor](#) na stranici 9

[DX-D 40C, DX-D 40G DR detektor](#) na stranici 11

[XD 14, XD*14 i XF*14 DR detektor](#) na stranici 13

[DR detektor XD 17, XD*17 i XF*17](#) na stranici 14

DR Retrofit sustav

Na DR Retrofit sustavu, DR detektor podržava uporabu rešetki na klik u Agfa asortimanu ili uporabu rešetki drugih proizvođača koje su istovjetne rešetkama koje se preporučuju ovim dokumentom.

Rešetka za smanjivanje rasipanja zračenja za držač detektora DR Retrofit sustava Full Leg Full Spine (cijela noga cijela kralježnica):

- 180 cm (71 inč), 52 linije/cm (132 linije/inču), 10:1
- 150 cm (59 inča), 52 linije/cm (132 linije/inč), 10:1 (ne vrijedi kada se upotrebljava vanjski kolimator)

Srodne informacije

[DR 14e DR detektor](#) na stranici 6

[DR 14s DR detektor](#) na stranici 6

[DR 14e DR detektor](#) na stranici 8

[DR 14s DR detektor](#) na stranici 9

[DR 14e DR detektor](#) na stranici 9

[DX-D 10C, DX-D 10G DR detektor](#) na stranici 10

[DX-D 40C, DX-D 40G DR detektor](#) na stranici 11

[DX-D 20C, DX-D 20G DR detektor](#) na stranici 11

[DR detektor DX-D 30C](#) na stranici 12

[DX-D 35C DR detektor](#) na stranici 12

[XD 14, XD*14 i XF*14 DR detektor](#) na stranici 13

[DR detektor XD 17, XD*17 i XF*17](#) na stranici 14