

1 NX Office Viewer Uygulamasının Başlatılması

- Masaüstünüzde bulunan NX Office Viewer simgesini çift tıklattın veya Başlat > (Tüm) Programlar > Agfa > Office Viewer'ı Başlat'ı tıklattın.




Oturum açma penceresi görünür.

- Parolanızı girin ve Tamam'ı tıklattın.

Varsayılan parola boştur.

NX Office Viewer Giriş ekranı görüntülenir ve uygulama normal Modda açılır.

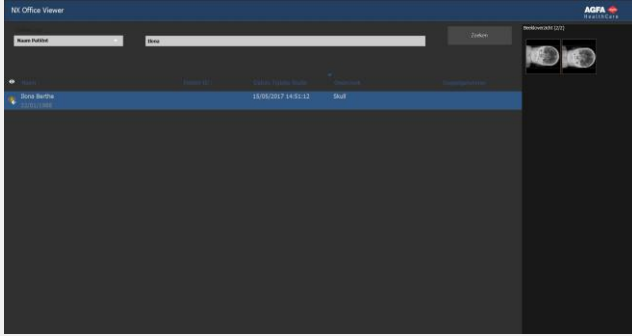

İlk oturum açmada varsayılan parolanın başka bir parola ile değiştirilmesi tavsiye edilir.

2 Muayenelerin aranması


- Arama bölümüne bir Oda içi NX İstasyonundan muayeneleri geri almak için özel ölçütleri girin.

Arama

Hasta Adı, Hasta Kimliği, Erişim Numarası veya Muayene Tarihine göre arama yapmak mümkündür.

Varsayılan olarak Muayene Tarihi metin alanında girilen günün tarihi ile seçilir.

- Ölçütlerinize uyan muayenelerin listesini görüntülemek için Ara düğmesini tıklattın.

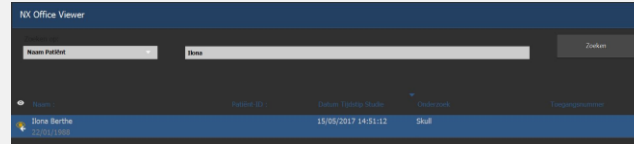

Oda-içi NX İş İstasyonunda aynı muayene görülüyorsa, göz simgesi çalışma listesindeki muayenenin yanında görüntülenir. Başka bir kullanıcı tarafından değiştirilebilir.




- Tıklanan sütun sıralama ölçütü olacak şekilde listeyi yeniden sıralamak için sütun başlıklarından birine tıklayın.

Sütun başlığına yeniden tıklayarak mevcut sıralama biçimleri (azalan veya artan sıralama) arasında geçiş yapabilirsiniz.

3 Bir görüntü seçilmesi

- Listeden bir muayene seçin.

Gör. Genel Bakış bölümünde bu muayenenin tüm görüntüleri küçük resimler şeklinde gösterilir.

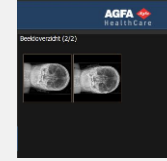

- Görüntülemek istediğiniz görüntüye tıklayın.

Seçilen görüntü tam ekranda görüntülenir, hasta demografik bilgilerini sol alt köşede ve ışınlama demografik bilgilerini sağ alt köşede gösterilir.



4 Görüntülerin Görüntülenmesi

Not: NX Office Viewer uygulamasında görüntü üzerinde yapılan değişiklikler NX İş İstasyonunda saklı görüntüyü etkilemez.

zum Fare tekerleğini döndürün
gezinme Farenizle tıklayın, tutun ve hareket ettirin

pencere/seviye ayarı Farenizle çift tıklayın ve hareket ettirin



İkincil fare düğmesine tıklayın ve açılan menüden seçiminizi yapın.

Not: Ekran görüntüsünü yazdır işlemi, bilgisayarda bir Windows yazıcısının kurulu olmasını gerektirir. Tıbbi yazıcı ile görüntü yazdırmak mümkün değildir.


Dikkat: Bir ekran görüntüsünü yazdırma ve kaydetme ile ortaya çıkan görüntü daima tanısız olmayan kalitededir.

■ Tam ekran görünümünden çıkmak için herhangi bir tuşa basın veya uygulama penceresinin sağ üst köşesindeki kırmızı çarpı işaretine tıklayın.



5 Görüntülerin karşılaştırılması

- Normal Moddan Karşılaştırma Moduna geçmek için Karşılaştırma Modu düğmesini tıklayın.
- Karşılaştırma Modunda tam ekranda yan yana gösterilecek iki görüntü seçin ve Görüntüleri Karşılaştır düğmesini tıklayın.

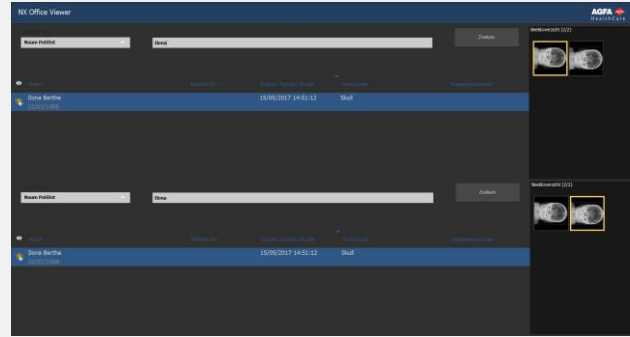

Üst muayene listesindeki muayenenin görüntüsü ekranın sol tarafında gösterilir. Alt muayene listesindeki muayenenin görüntüsü ekranın sağ tarafında gösterilir.



Normal Modda olduğu gibi aynı görüntüleme işlemleri her iki görüntü üzerinde de ayrı ayrı yapılabilir. Sadece Ekran

Görüntüsü Yazdır ve Ekran Görüntüsünü JPEG olarak Kaydet seçenekleri daima her iki görüntüye de birlikte uygulanır.