

1 NX Office Viewer の起動


■ デスクトップの **NX Office Viewer** アイコンをダブルクリックするか、あるいは**起動 (全) プログラム > Agfa > NX Office Viewer** をクリックします。



ログイン画面が表示されます。

■ パスワードを入力して、**[OK]**をクリックします。デフォルトのパスワードはブランクです。

NX Office Viewer のスプラッシュスクリーンが表示され、アプリケーションが通常モードで開きます。

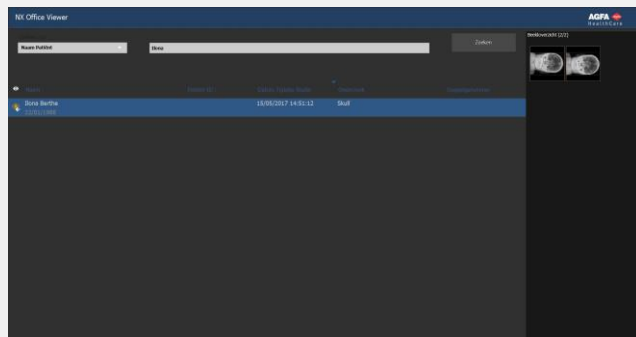

最初のログインに際し、デフォルトのパスワードをカスタムのパスワードに変更することをお奨めします。

2 検査の検索


■ **[検索]**フレームで、室内 **NX** ステーションから検査を抽出するための特定の基準を入力します。

検索

患者名、患者 ID、登録番号または検査日によって検索できます。

デフォルトでは、検査日にはテキストフィールドに入力された日付が選択されます。

■ **[検索]** をクリックして、基準に合致する検査を表示します。

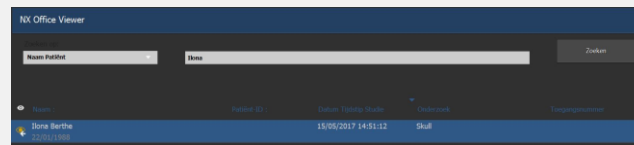

同じ検査が室内 **NX Workstation** で表示されている場合は、ワークリストの検査の隣に目のアイコンが表れます。それは、他のユーザーによって変更されることがあります。




■ 列のヘッダーの**1つ**をクリックして、クリックした列をソートの基準として再ソートします。

再び列のヘッダーをクリックすることで、可能なソート順（昇順または降順）を回っていきます。

3 画像の選択

■ リストから検査を選択します。

画像概要フレームで、この検査の全ての画像がサムネイルとして表示されます。

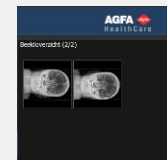

■ 表示したい画像をクリックします。

患者の表示項目を左下のコーナーに、照射の表示項目を右下のコーナーに表示しながら、選択した画像が全画面で表示されます。



4 画像の表示

注記: NX Office Viewer で作成された画像への変更は、NX Workstation に保管されている画像には影響しません。

ズーム マウスホイールをスクロールする

移動 マウスをクリックして、保持、移動させます。

ウィンドウ/レベルの調整 マウスをクリックして、移動させます。



セカンダリのマウスボタンをクリックして、コンテキストメニューの選択を行ないます。

注意: スクリーンショットの印刷操作は、Windows プリンタが PC に設定されていることを必要とします。画像を医療プリンタへ印刷させることはできません。

注意: スクリーンショットの印刷と保存の両方の結果は、常に非診断品質です。


■ 全画面表示を止めるには、どれかのキーを押すか、あるいはアプリケーションウィンドウの右上のコーナーにある赤い十字をクリックします。



5 画像の比較

■ 通常モードから比較モードに切り替えるには、[モードを比較] ボタンをクリックします。

■ 比較モードでは、全画面で互いに隣に表示する 2 つの画像を選択して[画像を比較] ボタンをクリックします。

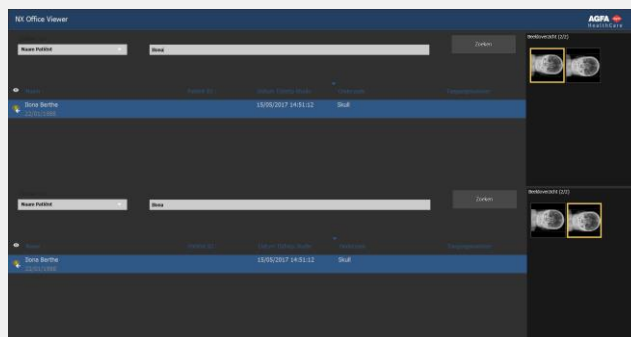

上の検査リストの検査からの画像は、画面の左側に表示されます。下の検査リストの検査からの画像は、画面の右側に表示されます。



通常モードの場合と同じ表示操作が、両方の画像に対して個別に実行されます。[スクリーンショットを印刷] および [スクリーンショットを JPEG として保存] だけが、常に 2 つの画像の両方に適用されます。