


Laptop/tablet z zewnętrznym punktem dostępu (Edimax)

Podręcznik użytkownika

Spis treści

Informacja prawna.....	3
Konfiguracja.....	3
Punkt dostępowy podłączony do stacji roboczej za pomocą kabla sieciowego.....	4

Informacja prawna

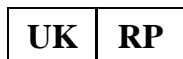

Agfa HealthCare UK Limited, 515 Coldhams Lane, CB1 3JS Cambridge, Cambridgeshire, UK

 Agfa NV, Septestraat 27, 2640 Mortsel, Belgia

Więcej informacji na temat produktów firmy Agfa można znaleźć na stronie internetowej pod adresem agfaradiologysolutions.com.

Agfa i romb Agfa są znakami towarowymi firmy Agfa-Gevaert N.V., Belgia lub jej podmiotów stowarzyszonych. NX i MUSICA są znakami towarowymi firmy Agfa NV, Belgia lub jednego z jej podmiotów stowarzyszonych. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjno-redakcyjnych bez zamiaru naruszenia praw.

Agfa NV nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela rękojmi, wyraźnej ani domniemanej, odnośnie dokładności, kompletności lub przydatności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności za przydatność do jakiegokolwiek szczególnego celu. Opisywane produkty i usługi mogą być niedostępne w regionie geograficznym użytkownika. Informacji o dostępności udzielają lokalni przedstawiciele handlowi. Agfa NV opracowuje informacje z należytą starannością, jednak nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy typograficzne. Agfa NV nie będzie pod żadnym warunkiem odpowiedzialna za jakiegokolwiek szkody wynikające z używania lub niemożności wykorzystania jakichkolwiek informacji, przyrządów, metod lub procesów przedstawionych w niniejszym dokumencie. Agfa NV zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia. Językiem wersji oryginalnej tego dokumentu jest angielski.

Copyright 2024 Agfa NV

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydawca: Agfa NV

2640 Mortsel, Belgia.

Żadne części niniejszego dokumentu nie mogą być reprodukowane, kopiowane, poddawane adaptacjom czy przekazywane w jakiegokolwiek postaci lub za pomocą jakichkolwiek środków bez pisemnej zgody firmy Agfa NV

Konfiguracja

Systemy Mobile DR i Ultra Mobile DR zawierają bezprzewodowy detektor DR i podręczną stację roboczą akwizycji MUSICA Acquisition Workstation i zapewniają komunikację bezprzewodową pomiędzy detektorem a stacją roboczą i pomiędzy stacją roboczą a siecią szpitalną.

W zależności od konfiguracji wymagane są pewne czynności ze strony użytkownika do zarządzania połączeniami.

W konfiguracji Mobile DR stacja robocza akwizycji MUSICA Acquisition Workstation jest zainstalowana na laptopie.

W konfiguracji Ultra Mobile DR stacja robocza akwizycji MUSICA Acquisition Workstation jest zainstalowana na tablecie.

Dokumentacja użytkownika detektora DR zawiera informacje o bezpieczeństwie, przeznaczeniu sprzętu i ogólne instrukcje obsługi.


Punkt dostępowy podłączony do stacji roboczej za pomocą kabla sieciowego

Detektory DR:

- DR 10s, DR 14s
- DR 10e, DR 14e, DR 17e
- DX-D 40C, DX-D 40G, DX-D 45C, DX-D 45G
- XD 10, XD*10, XD 14, XD*14, XD 17, XD*17
- XF*10, XF*14, XF*17

Stacja robocza komunikuje się z detektorem za pomocą punktu dostępowego. Stacja robocza komunikuje się z bezprzewodową siecią szpitalną za pomocą wewnętrznego adaptera WiFi. Oba połączenia są aktywne równocześnie.

Nie są wymagane żadne czynności ze strony użytkownika do zarządzania połączeniami.

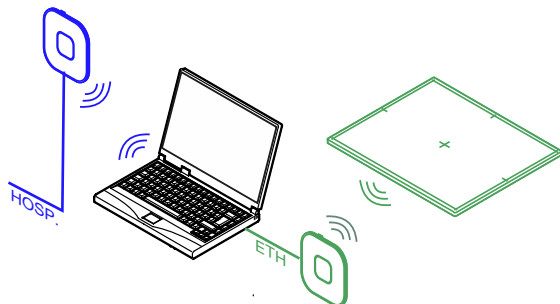

Rysunek 1: Punkt dostępowy podłączony do stacji roboczej za pomocą kabla sieciowego

Przykład punktu dostępu, który może być używany w tej konfiguracji: Edimax 6288.